

Charge maxi : 250 kg

TurningSling est un auxiliaire d'aide au retournement que l'on associe avec un étrier de levage à deux points fixé au plafond, ou avec un auxiliaire de levage mobile. Il est conçu pour fournir un appui lombaire, tout en laissant le bas du dos libre pour faciliter la toilette et permettre d'habiller le patient. TurningSling comporte deux points d'accrochage de chaque côté. TurningSling est fabriqué dans une matière à usage unique et résistante à l'usure. Ce produit ne peut pas être lavé, mais par contre jeté quand l'utilisateur n'en a plus besoin.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



Contrôle de fonctionnement

Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou sali. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.


Conservé le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes. Utiliser un étrier de levage éprouvé.

C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

Description

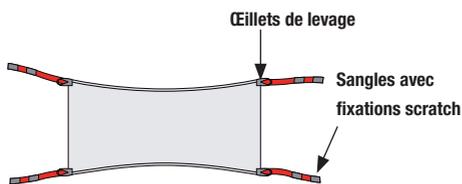

TurningSling est fabriqué dans un matériau à usage unique, très résistant. Il comporte deux œillets de levage et deux sangles avec des fixations scratch sur chacun des côtés courts.



ATTENTION ! Les sangles avec fixations scratch ne doivent pas être fixées sur l'étrier de levage !

ATTENTION ! Le produit ne doit être utilisé que pour retourner une personne.


ATTENTION ! La grille de lit doit être relevée du côté vers lequel se tourne le patient.

Mise en place



Replier l'une des extrémités de TurningSling et placer les mains dans la poche qui se forme.

Placer TurningSling sous la partie lombaire du patient.

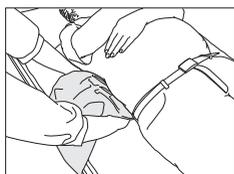

Presser le matériau contre le matelas et le faire passer aussi loin que possible sous le patient.




Passer de l'autre côté et placer les mains sous le patient, puis saisir TurningSling et tirer dessus vers l'extérieur.



Tirer jusqu'à ce qu'il y ait autant de tissu des deux côtés du patient.

Mise en place de EasyGlide Oval

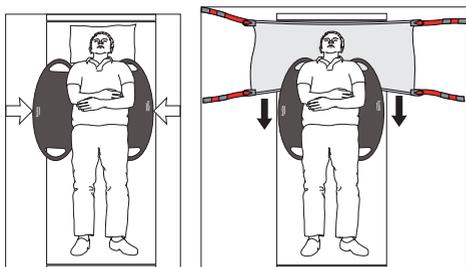


Placer deux EasyGlide Oval sous le patient.

Placer TurningSling entre les plaques de glissement et le support. Tirer ensuite sur TurningSling vers le bas, derrière le dos du patient.


Retirer les plaques de glissement.

Utilisation

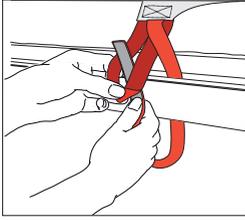


Pour que TurningSling reste en place sous le patient quand on retourne celui-ci, fixer l'un des côtés à un endroit adéquat de l'encadrement de lit.


Faire passer la sangle libre avec scratch d'un côté de l'encadrement de lit et l'œillet de levage de l'autre côté.

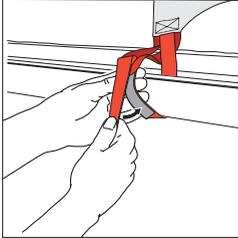

Placer la sangle avec scratch à travers l'œillet de levage et fixer le scratch.

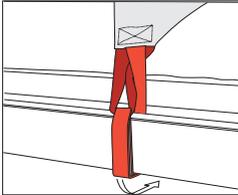


Vérifier que la fixation est correcte en tirant sur les sangles pour les tendre.

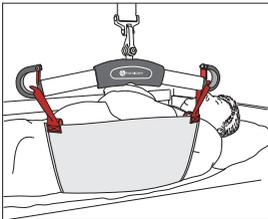

Préparer le patient en vue de le retourner.

Relever la grille de lit du côté vers lequel doit se tourner le patient. Placer les œilletons de levage sur l'étrier de levage. Commencer à retourner le patient, puis s'arrêter pour vérifier que tout est en ordre. Continuer ensuite jusqu'à ce que le patient soit couché sur le côté.

ATTENTION ! Les sangles avec fixations scratch ne doivent pas être fixées sur l'étrier de levage !

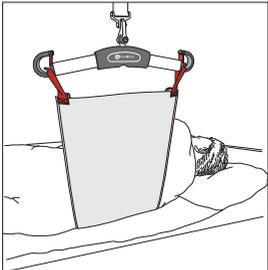

Laisser l'auxiliaire de levage maintenir TurningSling, de sorte que le patient ait un appui derrière le dos pendant sa toilette ou que l'on panse une plaie.

ATTENTION ! Le produit ne doit être utilisé que pour retourner une personne.

Pour l'enlever

Tirer sur une extrémité de TurningSling pour le faire glisser sous le patient.

En cas d'utilisation fréquente, TurningSling peut également être laissé en place sous le patient. L'auxiliaire peut être glissé sous un éventuel drap de transfert.

Matériaux :

Non-Woven: Polypropylene, hydrophobic

Conseils d'entretien, Non-Woven :

Lire l'étiquette du produit.

Non lavées, jeter quand il est sale ou doit être remplacé pour toute autre raison.



Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

