

Maks belastning: 250 kg

TurningSling er et vendingshjelpemiddel som kombineres sammen med en topunktsløftebøyle i tak-, eller mobiløfter. Den er utformet for å gi støtte bak korsryggen, men dekker ikke helt ned til setet. Dette for å forenkle rengjøring og påkledning. TurningSling har to festepunkter på hver side. TurningSling er produsert i et slitesterkt engangsmateriale som innebærer at den ikke er vaskbar, men kastes når den blir skitten eller når brukeren ikke lenger trenger hjelpemiddelet.

I SystemRoMedic finnes det et stort utvalg av funksjonelle, komfortable og kvalitetssikrede løfteseil som er tilpasset mange forskjellige løft og tilpasset brukere med mange forskjellige behov. Løfteseilene finnes i mange ulike materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle modellene er både sikre og meget lette i bruk og de er godkjente for brukervekt opp til 300 kg. Valget av modell og materiale bestemmes av løftesituasjonen og brukerens behov.



Kontroll av funksjon

Visuell og mekanisk inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.


Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Benytt en utprøvd løftebøyle.

Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør for bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.

Beskrivelse

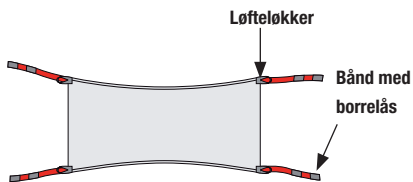

TurningSling er produsert i et slitesterkt engangsmateriale og har to løfteløkker og to bånd med borrelås på hver kortside.



OBS! Båndene med borrelås skal ikke festas på løftebøylen!

OBS! Produktet skal bare benyttes for vending.


OBS! Sengegrinden skal være oppe på den siden som brukeren vendes mot.

Plassering



Viki inn den ene enden på TurningSling og plasser hendene i den lommen som formes.


Plasser TurningSling under korsryggen på brukeren.

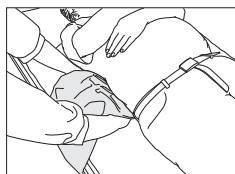

Trykk ned materialet mot madrassen og før den inn så langt som mulig under brukeren.




Bytt til motsatt side og før inn hendene under brukeren, ta et fast grep rundt TurningSling og trekk den ut.

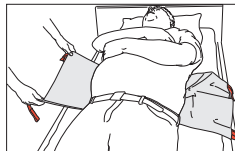

Dra i TurnSling til det er like mye stoff på begge sider av brukeren.

Plassering med EasyGlide Oval

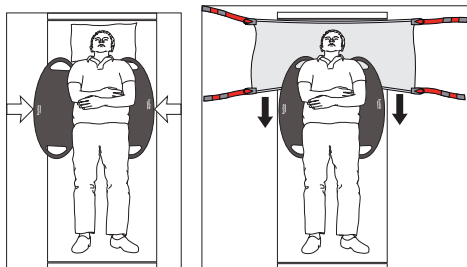


Plasser to EasyGlide Oval under brukeren.

Plasser TurningSling mellom glidebrettene og underlaget. Før så TurningSling ned bak ryggen på brukeren.


Ta bort glidebrettene.

Bruk

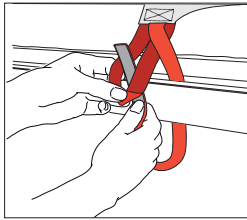


For at TurningSling skal bli liggende igjen under brukeren ved en vending, kan man feste den ene siden på TurningSling på et passende sted i sengerammen.


Det løse båndet med borrelås tres på en side av sengerammen og løfteløkken på den andre siden.

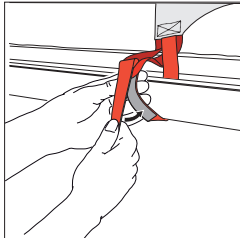

Plasser båndet med borrelås gjennom løfteløkken og fest borrelåsen.

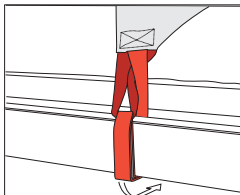


Kontroller at den er skikkelig festet ved å trekke i båndene.

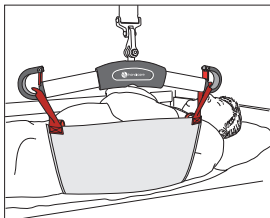

Forbered brukeren før vending

Fell opp sengegrinden på den siden som brukeren skal vendes mot. Plasser løfteløkkene på løftebøylen. Start vendingen og stopp opp for å sjekke at alt ser korrekt ut. Fortsett deretter vendingen til brukeren ligger på siden.

⚠ OBS! Båndene med borrelås får ikke festes på løftebøylen!

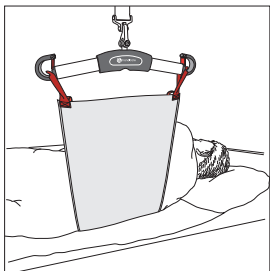

La TurningSling være på løfteren slik at brukeren har støtte bak ryggen ved vask/sårstell.

⚠ OBS! Produktet får bare benyttes ved vending.

Fjerning

Trekk i den ene enden på TurningSling slik at den glir under brukeren.

TurningSling kan også bli liggende igjen under brukeren om den benyttes ofte. Den kan evt. res inn under trekkklaken.

Materiale:

Non-Woven: Polypropylene, hydrophobic

Vedlikeholdsråd, Non-woven:

Les på løfteselens produktmerking (etikett)

Skal ikke vaskes, og kastes når den er skitten eller behøver å byttes ut av en annen anledning.



Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

