

SWL 300kg

SlingBar är en serie lyftbyglar som kombineras med av Handicare godkänd mobil eller stationär lyft. De är utvecklade för att tillsammans med en korrekt utprovad lyftsele lyfta en brukare. De finns i tre olika storlekar.

I SystemRoMedic finns ett brett urval av funktionella, bekväma och högkvalitativa lyftselar anpassade för olika typer av lyft och för brukare med olika behov. Lyftselarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Alla modeller är både säkra och mycket lätta att använda och de klarar brukare upp till 300 kg. Valet av modell och material styrs av lyftsituationen och brukarens behov.



## Kontroll av funktion

### Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av produkten. Kontrollera att materialen är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.



## Läs alltid manualen

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Undvik urglidningsrisk eller obehag genom att vara noggrann vid utprovning av lyftselen. Haka först på lyftselens ryggöglor på lyftbyglen, haka därefter på benstödens öglor. Används utprovad lyftbygel.

Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.

## Produktbeskrivning av SlingBar

SlingBar är tillverkad i aluminium.

SlingBar kombineras med av Handicare godkänd mobil eller stationär lyft. Lyftkrokarna är utrustade med urkrokningskydd.



SlingBar S är 35cm bred och lämpar sig framförallt till barn, smala personer eller vid gåträning.




SlingBar M är 45cm bred och är lämplig vid de flesta förflyttningar.



SlingBar L är 60cm bred och är lämplig till personer som behöver mer utrymme i lyftselen. Exempelvis personer som är tyckkänsliga, bredaxlade eller överviktiga.


### Montering av SlingBar på mobil lyft:

- 1 x 90000038 (Skruv M8x50)
- 1 x 90000026 (Mutter M8)
- 2 x 90000124 (Bricka för Täckhatt M10)
- 2 x 90000014 (Täckhatt M10)

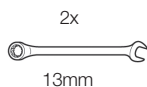

### Montering av SlingBar på stationär lyftmotor:

- 1 x 90000038 (Skruv M8x50)
- 1 x 90000026 (Mutter M8)
- 2 x 90000124 (Bricka för Täckhatt M10)
- 2 x 90000014 (Täckhatt M10)

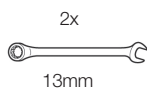

## Maxlast

Olika produkter i den sammansatta lyftenheten (lyft, lyftbygel, lyftsele, våg och eventuella andra lyfttillbehör) kan ha olika tillåtna maxlaster. Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.

## Rengöring

Vid behov, rengör lyftbygeln med varmt vatten eller tvättsprit. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fenol eller klor då detta kan skada materialet.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se [www.handicare.com](http://www.handicare.com) för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

