

Max: 250 kg

TurningSling ist ein Hilfsmittel zum Wenden in Verbindung mit einem Zweipunktbügel bei Decken- oder Mobilflöter. Es stützt den Lendenrücken; das Gesäß bleibt jedoch frei, um Reinigung und Ankleiden zu erleichtern. TurningSling hat an jeder Seite zwei Aufhängepunkte. TurningSling besteht aus einem strapazierfähigen Einwegmaterial, d.h. wird nicht gewaschen sondern weggeworfen, wenn das Gerät schmutzig ist oder nicht mehr gebraucht wird.

Das SystemRoMedic umfasst eine breite Auswahl an funktionellen und bequemen Hebegurten hoher Qualität, speziell entwickelt für verschiedene Arten von Hebeaktionen und für Patienten mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Hebegurte sind in mehreren Materialausführungen und Größen von XXS bis XXL erhältlich. Sämtliche Modelle sind sowohl sicher als auch einfach in der Anwendung und halten einer Belastung bis zu 300 kg stand. Die Wahl von Modell und Material ist abhängig von der jeweiligen Hebesituation und dem Bedarf des Patienten.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung und mechanische Kontrolle

Unterziehen Sie den Hebegurt regelmäßigen Funktionskontrollen. Nach jeder Wäsche prüfen. Prüfen Sie Nähte und Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist. Belasten Sie Schnallen und Griffe und prüfen Sie, ob sie starker Belastung standhalten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung


Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Verweilen Sie während des Umsetzungsmoments beim Patienten.

Vermeiden Sie die Gefahr des Abgleitens oder Unbehagens durch sorgfältige Prüfung des Hebegurtes. Zunächst die Rückenschlaufen des Hebegurtes einhängen, danach die Schlaufen der Beinstütze. Nur geprüfte Hebebügel verwenden. Das zusammengebaute Produkt darf jedoch auf keinen Fall höher belastet werden als das Einzelteil mit der geringsten Höchstbelastung. Prüfen Sie in jedem Fall vor der Anwendung die zulässige Höchstbelastung von Lifter und Zubehör. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Beschreibung

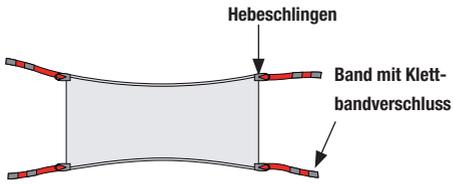

TurningSling besteht aus einem strapazierfähigen Einwegmaterial mit je zwei Hebeschlingen und zwei Bändern mit Klettbandverschluss an den Kurzseiten.



ACHTUNG! Die Bänder mit Klettbandverschluss dürfen nicht am Hebebügel befestigt werden!

ACHTUNG! Das Produkt darf nur zum Wenden benutzt werden.

ACHTUNG! Das Bettgitter muss an der Seite, zu der der Patient hin gewendet wird, hochgeklappt sein.

Positionierung




Das eine Ende von TurningSling umschlagen und Hände in die entstandene Falte einsetzen.

TurningSling unter dem Lendenrücken des Patienten positionieren.



TurningSling gegen die Matratze pressen und soweit wie möglich unter den Patienten schieben.

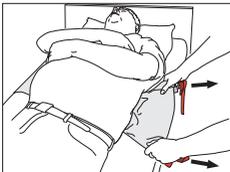


Von der anderen Seite her die Hände unter den Patienten schieben, TurningSling greifen und herausziehen.



Soweit herausziehen, bis an beiden Seiten des Patienten gleich viel Stoff hervorsteht.

Positionierung mit EasyGlide Oval

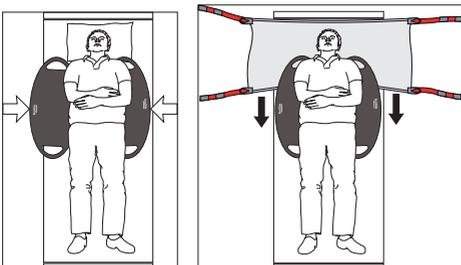


Zwei EasyGlide Oval unter dem Patienten positionieren.

TurningSling zwischen den Gleitplatten und der Unterlage einschieben. Anschließend TurningSling hinter dem Rücken des Patienten nach unten ziehen.


Gleitplatten entfernen.

Anwendung

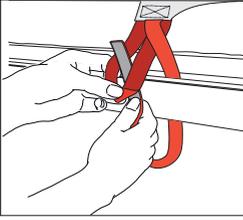


Damit TurningSling beim Wenden unter dem Patienten liegen bleibt, ist die eine Seite an einer geeigneten Stelle des Bettrahmens zu befestigen.


Das lose Band mit Klettverschluss wird an einer Seite des Bettrahmens befestigt, die Hebeschlinge an der anderen Seite.

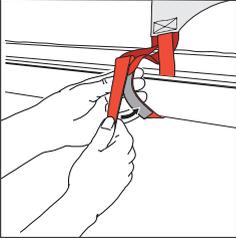

Das Band mit Klettverschluss durch die Hebeschlinge ziehen und Klettverschluss befestigen.

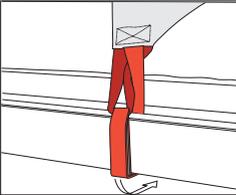


Durch Strecken des Bandes prüfen, ob es ordentlich festsetzt.

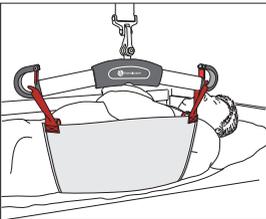

Den Patienten auf den Wendevorgang vorbereiten.

Das Bettgitter an der Seite, zu der der Patient hin gewendet wird, hochklappen. Hebeschlingen am Hehebügel anbringen. Wendevorgang starten und zwischendurch prüfen, ob alles korrekt verläuft. Wendevorgang fortsetzen bis der Patient auf der Seite liegt.

⚠ ACHTUNG! Die Bänder mit Klettbandverschluss dürfen nicht am Hehebügel befestigt werden!

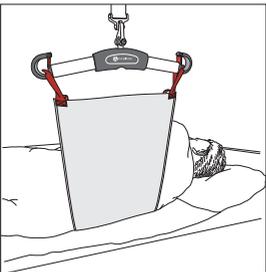

TurningSling am Lifter belassen, damit der Patient während des Waschens/Wundbehandlung gestützt wird.

⚠ ACHTUNG! Das Produkt darf nur zum Wenden benutzt werden.

Entfernen

An einem Ende des TurningSling ziehen, damit er unter dem Patienten herausgleiten kann.

Bei häufiger Verwendung kann TurningSling auch unter dem Patienten liegen bleiben. TurningSling kann eventuell unter ein Ziehlaken eingebettet werden.

Material:

Non-Woven: Polypropylene, hydrophobic

Pflegeanleitung, Non-Woven:

Lesen Sie das Produktetikett des Hebegurtes. Nicht waschen, sondern bei Verunreinigung oder Wechsel aus anderen Gründen wegwerfen.



Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf www.handicare.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage www.handicare.com zum Download bereit.

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se



handicare