

Maks: 300kg

StretcherBar er et løfteåg, som sammen med et specielt udformet løftesejl – StretcherSling – anvendes ved horisontale løft. Det er udformet med ti ophængningspunkter, fem på hver side af brugeren, hvilket giver brugeren en jævnt fordelt støtte under hele kroppen. StretcherBar er udformet til at tilgodese behov for forflytning af brugere i liggende stilling.

I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekvemme løftesejle af høj kvalitet, tilpassede forskellige typer løft og brugere med forskellige behov. Løftesejlene findes i flere forskellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette at anvende, og de kan løfte brugere op til 300 kg. Valg af model og materiale bestemmes af løftesituationen og brugerens behov.



Funktionskontrol

Visuel inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.



Læs altid manualen

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.


Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.

Undgå risikoen for, at brugeren glider ud eller føler sig ubehageligt tilpas ved at være omhyggelig med afprøvningen af løftesejlet. Hægt først løftesejlets rygstropper på løfteåget; hægt derefter benstøttens løkker på. Anvend afprøvet løfteåg.

Det er altid den lavest tilladte max. belastning på det respektive produkt i den sammensatte løfteenhed, der styrer.

Kontroller altid den tilladte max. belastning på løfte og løftetilbehør inden brug, og kontakt din forhandler ved spørgsmål.


Produktbeskrivelse af StretcherBar og StretcherSling

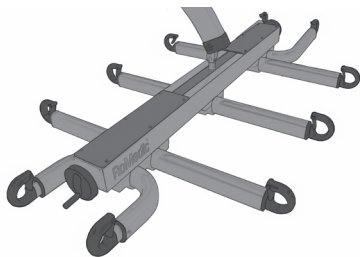

StretcherBar är tillverkad i aluminium och utformad med en midterdel, som er fremstillet i aluminium og udformet med en indbygget ligevægtsregulator, og fem aluminiumsprofiler med løftekroge i hver ende.


StretcherBar kombineres med en mobil eller stationær løfter godkendt af Handicare.

StretcherSling er udformet til StretcherBar, og ingen andre kombinationer kan anbefales.

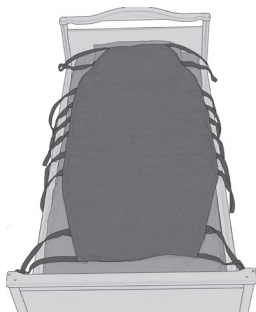


StretcherSling er udformet med et stofstykke, som er 177 cm, og fem løftestropper, som hænger sammen mellem begge sider. Det gør, at brugerens vægt fordeles på ti bånd under brugeren.

Læs også manualen for StretcherSling.

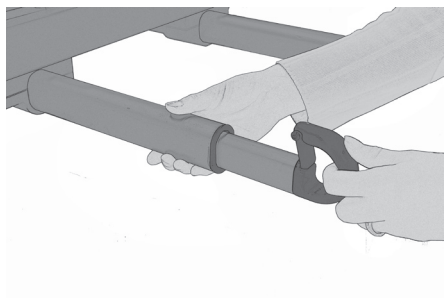


Løftekroge er udstyrede med afkrogningsbeskyttelse, og alle løftearme kan efter behov reguleres efter brugerens bredde ved et let træk lige ud, inden løftet påbegyndes.

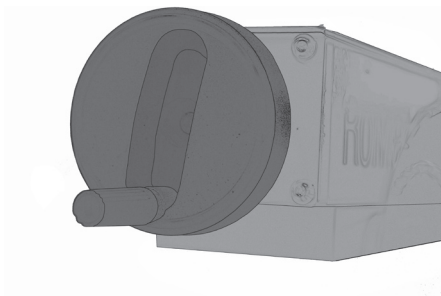

Midterdelen på StretcherBar indeholder en indbygget ligevægtsregulator. Dette reguleres helt enkelt via et håndsving på begge sider, som man drejer på for at opnå den ønskede ligevægt.

Placering og bortfjernelse af StretcherSling kan kun foretages, når brugeren ligger ned

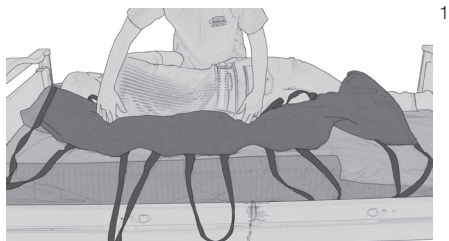


1

1. Vend brugeren imod dig. Placer StretcherSling med mærkaten mod underlaget og midterlinjen efter brugerens ryggrad.


StretcherSlings øvre kant skal give støtte til hovedet.

Placer løftesejlets kant så langt inde under brugeren som muligt. Før stropperne ind under, så du kan nå dem, når du har vendt brugeren tilbage på StretcherSling.

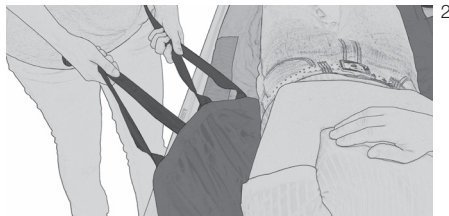

2


2. Vend brugeren tilbage på løftesejlet, og træk sejlet frem på den anden side ved hjælp af ophængningsstropperne.

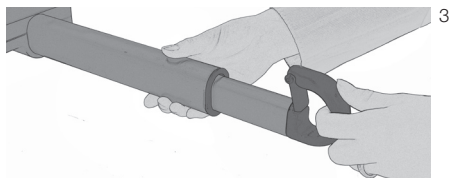

3

3. Efter behov: Juster bredden på StretcherBar afhængig af brugerens bredde ved at trække løftekrøgene ud.

Sæt derefter løftestropperne fast på krogene på åget.

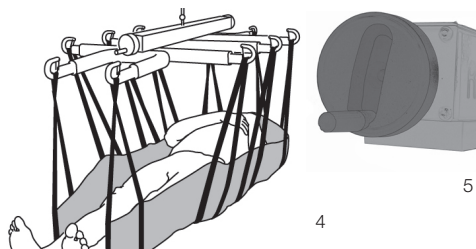

5

4. Hæv løfteren, til alle ophængningsstropper er strakte. Stop op og kontroller, at alt er i orden, inden du hæver så meget, at brugeren løftes fra underlaget.


5. Hvis der ikke er ligevægt, når brugeren er løftet fra underlaget, så reguleres det ved at dreje håndsvinget til ligevægt for at skabe ligevægt.

Bortfjernelse af StretcherSling



1

1. Frigor først samtlige ophængningsstropper fra løfteren, og fjern den. Vend derefter brugeren mod dig, og fold StretcherSling ind under sig selv mod underlaget.

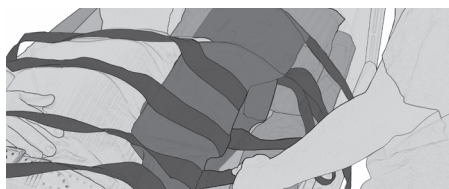

2

2. Stoffet glider derefter mod sig selv, når du trækker StretcherSling ud, efter du har vendt brugeren tilbage.

Max. belastning

Der kan forekomme forskellige tilladte max. belastninger for produkterne i den sammensatte løfteenhed (løfter, løfteåg, løftesejl, vægt og eventuelt andet løftetilbehør). Det er altid den lavest tilladte max. belastning på det respektive produkt i den sammensatte løfteenhed, der styrer. Kontroller altid den tilladte max. belastning på løfte og løftetilbehør inden brug, og kontakt din forhandler ved spørgsmål.

Rengøring

Rengør produktet med varmt vand eller rengøringsprit. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder fenol eller klor, da det kan skade materialet.

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

