
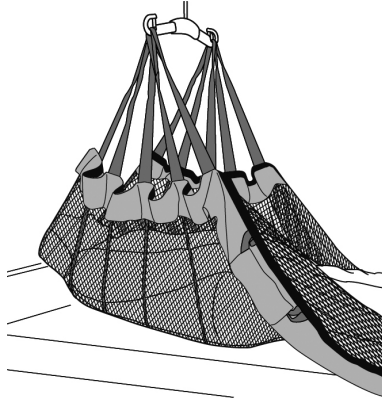


# SafeHandlingSheet

SystemRoMedic™

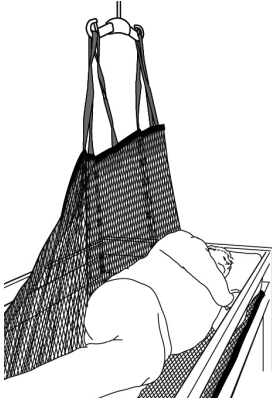

SWL: 300 kg, 400 kg, 570 kg

SafeHandlingSheet on lakana, jota voidaan käyttää sekä kiinteästi asennettujen että siirrettävien nostimien kanssa potilaan sijoittamiseen sänkyyn. Siinä on kuusitoista ripustuspistettä, kahdeksan potilaan kummallakin puolella.

SafeHandlingSheet on tarkoitettu potilaiden sijoittamiseen sänkyyn.

SystemRoMedic tarjoaa kattavan valikoiman toimivia, mukavia ja korkealaatuisia nostoliinoja, jotka sopivat erilaisiin nostoihin ja potilaille, joilla on erilaisia tarpeita. Nostoliinoja on saatavana eri materiaaleina ja kokoina XXS-XXL. Kaikki mallit ovat turvallisia ja erittäin helppokäyttöisiä, ja niiden enimmäiskuormitus on 300 kg. Mallin ja materiaalin valintaan vaikuttavat potilaan toimintakyky ja tilanteet, joissa tuotetta käytetään.



## Toiminnan tarkastus

### Silmämääräinen ja mekaaninen tarkastus

Tarkasta nostoliinan kunto ja toimivuus säännöllisin väliajoin. Tarkasta tuote aina pesun jälkeen. Varmista, että saumat ja materiaali ovat ehjät. Varmista, ettei kangas ole kulunut tai haalistunut. Suorita lopuksi koekuormitus varmistaaksesi, että soljet, vetolenkit jne. kestävät raskaan kuormituksen. Mikäli nostoliinassa havaitaan vaurioita, tuote on vaihdettava uuteen.



## Lue aina käyttöohje

Lue aina huolellisesti läpi kaikkien siirrossa käytettävien välineiden käyttöohjeet.


Säilytä ohje tuotteen käyttäjien saatavilla.

Älä jätä nostettavaa yksin missään nostotilanteen vaiheessa.

Tehdäksesi nostosta mahdollisimman miellyttävän ja estääksesi nostettavaa liukumasta irti nostoliinasta, sovita liina ensin huolellisesti. Pujota ensin nostoliinan selkäosan vetolenkit nostokaareen ja sen jälkeen reisituet paikalleen. Käytä testattua nostokaarta.

Se yksikköön sisältyvä tuote, jolla on pienin sallittu enimmäiskuormitus, määrää aina koko yksikön suurimman sallitun kuormituksen. Tarkasta aina ennen käyttöä nostimen ja nostovälineiden sallitut enimmäiskuormitukset. Kysy tarvittaessa neuvoa jälleenmyyjältäsi.

## SafeHandlingSheetin tuotekuvaus:

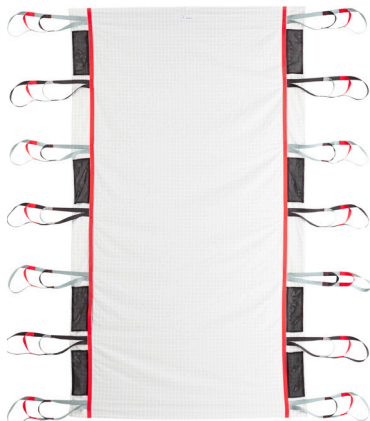

SHSheet L Polyesteriverkko/WendyLett4Way

SafeHandlingSheet-siirtolakanassa on nostohihnaa molemmilla puolilla.

Hoitajan työn helpottamiseksi joka toisen nostohihnan väri on harmaa ja joka toisen musta.

Nostohihnoissa on kolme eriväristä lenkkiä: harmaa, punainen ja musta.


SafeHandlingSheet on varustettu tarralla, joka osoittaa, kumpi puoli tulee sängyssä ylöspäin. "This side up".

Tarra on sijoitettu niin, että se osoittaa myös lakanan keskikohdan.




SHSheet L Polyesteriverkko

Sijoittamisen jälkeen hihnat asetetaan potilasin alle tai sivutaskuihin.

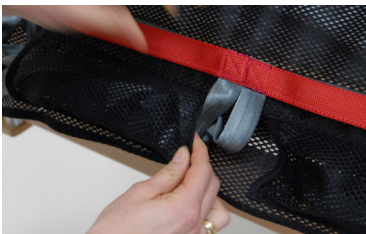

### Vinkki!


- Petaa tavallinen lakana SafeHandlingSheet-siirtolakanan päälle.
- Aseta potilas SafeHandlingSheet-siirtolakanan keskelle.
- Petaa SafeHandlingSheet-siirtolakanan ylimääräinen osa sängyn jalkopäähän siltä varalta, että potilas liukuu alaspäin sängyssä ja häntä on siirrettävä ylöspäin.
- Suositeltavaa on käyttää katonostinjärjestelmää.
- Jos mahdollista, pyri siirtämään sänkyä sen sijaan, että työntäisit/vetäisit potilasta, kun hänet on nostettu alustalta.

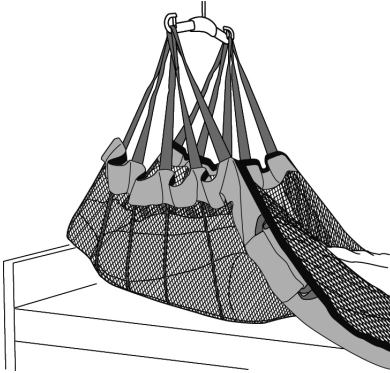

#### **Ylemmäksi sängyssä:**

Viisi ylintä hihnaa kummallakin puolella (tai niin monta kuin kitkapisteitä varten tarvitaan) kiinnitetään nostokaareen.

Aloita nosto nostimella ja siirrä potilasta ylöspäin sängyssä, kun nostettava kohoo irti alustasta.

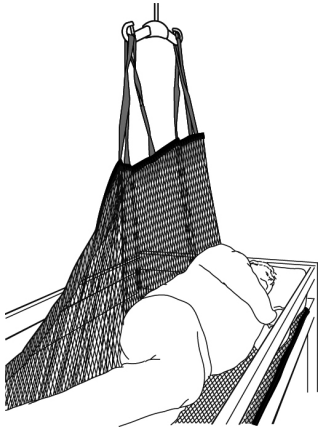

#### **Kääntäminen sängyssä:**

Jos potilas on sijoitettava sängyn keskelle kääntämisen jälkeen, on suositeltavaa siirtää potilas ensin sivusuunnassa (ks: Ylemmäksi sängyssä) sängyn toiselle puolelle ja sen jälkeen laskea hänet sängyn keskelle.

Laskeaksesi potilaan sängylle kiinnitä neljä keskimmäistä hihnaa SafeHandlingSheet-siirtolakanan sivulta (laskusuunnan vastakkaiselta puolelta) nostokaareen. Jos sänkylaitoja ei käytetä, on sängyn toisella puolella oltava avustaja potilaan turvallisuuden varmistamiseksi. Nosta nostinta varovasti kääntääksesi potilaan sängyn keskustaan päin.

#### **SafeHandlingSheetin vaihto:**

Vanhan SafeHandlingSheetin vaihtamiseksi potilasta nostetaan ensin aiemmin kuvatulla tavalla. Kun potilas on nostettu ylös sängystä, asetetaan uusi SafeHandlingSheet sängyn keskelle.


Laske potilas takaisin sängylle ja irrota vanha SafeHandlingSheet nostokaaresta. Kiinnitä uusi SafeHandlingSheet nostokaareen ja käännä potilas toiselle sivulle (ks: Kääntäminen sängyssä) ja rullaa/sullo vanha SafeHandlingSheet potilaan selän taakse ja laske potilas takaisin selälleen sänkyyn. Tee seuraavaksi uusi kääntö uudella SafeHandlingSheet-siirtolakanalla vastakkaiseen suuntaan, vedä vanha SafeHandlingSheet potilaan selän takaa ja laske potilas takaisin selälleen sänkyyn.

## Seisomaan nostaminen – istuvasta asennosta sängyn laidalta


**Huom!** Tämä toimenpide edellyttää, että potilas kykenee istumaan sängyn laidalla.

Laske sänkyä niin, että potilas voi asettaa jalkansa tukevasti lattialle istuessaan sängyn laidalla.

Jos sänky ei ole riittävän matala, käytä jalkatukea.

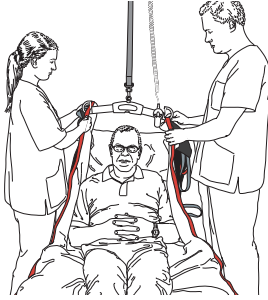

Valmistele potilas nostoa varten.  
Nosta sängyn selkänojaa ja  
pujota ylimmät vetolenkit nosto-  
kaareen.

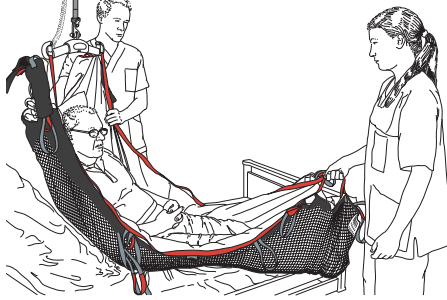


Toinen hoitaja tarttuu jalkopään vetolenkeistä.

Aloita nosto nostimella.

Hoitaja nostaa potilaan jalat sängyn reunan yli asettaen ne lattialle.

Varmista, että potilas pystyy istumaan turvallisesti sängyn laidalla. Polvien ja lonk-  
kien tulee olla samalla korkeudella.

Aseta sopiva seisonta- tai kävelytuki potilaan eteen seisovaan asentoon nostoa  
varten.

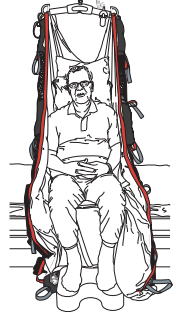

### Tuote

SHSheet L poly verkko  
SHSheet XL poly  
SHSheet XXL poly/vahvistettu  
SHSheet L Poly verkko/  
WendyLett4Way

### Tuotenro

47522007  
47502008  
47502009  
47542007

### Mitat

240 x 115  
240 x 115  
240 x 130  
240 x 115

### Materiaali

Polyesteriverkko: Hengittävä materiaali  
Polyesteri: Kestävä, pienikitkainen materiaali  
Polyesteri: Kestävä, pienikitkainen materiaali  
Polyesteriverkko: Hengittävä materiaali  
WendyLett4Way: Liukulakana potilaan alle

### SWL

300 kg  
400 kg  
570 kg  
300 kg

### Hoitto-ohje:

Lue ohjeet tuotteen etiketistä.



Älä käytä huuhteluinetta.

Pidentääksesi tuotteen käyttöikää  
vältä kuivausrummun käyttöä.

Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjääsi, jos sinulla on kysyttävää tuotteesta ja sen käytöstä. Katso jälleenmyyjät osoit-  
teesta [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Varmista aina, että sinulla on käyttöohjeesta oikea versio. Uusimmat käyttöohjeet voit ladata  
osoitteesta [www.handicare.com](http://www.handicare.com).

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

