

Max: 300kg



ClassicHighBackSling donne à l'utilisateur une bonne position assise et un bon sentiment de sécurité. Il est conçu pour être laissé dans le fauteuil après le déplacement et on peut rester assis dessus. Il fournit un appui depuis l'articulation des genoux jusqu'aux épaules. ClassicHighBackSling est conçu pour prendre en charge les situations de levage les plus courantes, telles que le passage du lit au fauteuil roulant, etc.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



## Contrôle de fonctionnement

### Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pâli. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



## Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.

Conservé le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.



Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes. Utiliser un étrier de levage éprouvé.

Mettre en place les œillets de levage du harnais de levage avant les œillets des appuis pour les jambes et utiliser un étrier de levage agréé.

C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

## Pour mettre en place le harnais de levage quand l'utilisateur est couché sur son lit/un brancard ou au sol :

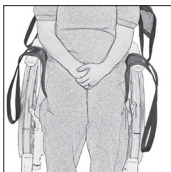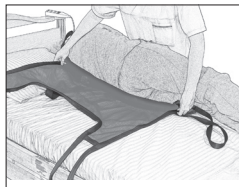

1. Retourner l'utilisateur vers soi. Placer le harnais de levage de sorte que le milieu de celui-ci suive la colonne vertébrale et que la partie inférieure soit à env. 5-10 cm au-dessus de l'articulation des genoux de l'utilisateur. Placer le bord du harnais de levage aussi loin que possible sous l'utilisateur.

2. Retourner la personne et contrôler qu'elle est au milieu du harnais de levage.

3. Il est conseillé de lever l'appui dorsal avant de lever.

4. Le harnais de levage reste dans le fauteuil.

## On ne peut retirer ClassicHBSling qu'en position couchée sur le lit/brancard ou au sol.

Procéder de la même manière que pour la mise en place, mais dans l'ordre inverse.

### Matériaux :

Filet polyester : Matériau aéré pouvant au besoin être laissé en place sous l'utilisateur. Supporte des températures de lavage élevées.

### Conseils d'entretien :

Lire l'étiquette-conseil du harnais de levage.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant.

Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

### Information sur les tailles

Les harnais de levage peuvent souvent être utilisés pour suspension par 2 et 4 points. Il est important d'être prudent et de s'assurer que la largeur de l'étrier de levage est adaptée à la taille du harnais de levage et aux besoins de l'utilisateur. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, utiliser des harnais de levage individuels pour chaque utilisateur spécifique.

Taille		XS/Orange	S/Rouge	M/Jaune	L/Vert	XL/Lilas
Poids brut rec. lbs		44-88	66-132	121-187	176-265	243-309
de l'utilisateur Kg		20-40	30-60	55-85	80-120	110-140
Hauteur du	inch	37,5	38,5	42	43	45
harnais de	cm	95	98	106	110	115
levage						

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site [www.handicare.com](http://www.handicare.com) pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

