



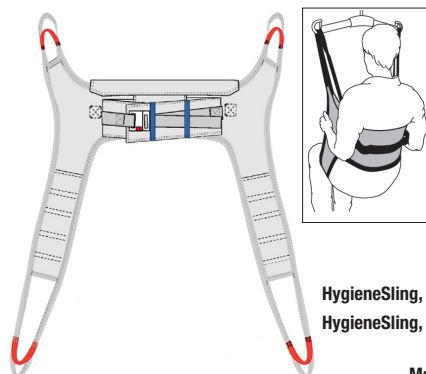

HygieneSling, with belt
HygieneSling, w/o belt

Max: 300kg

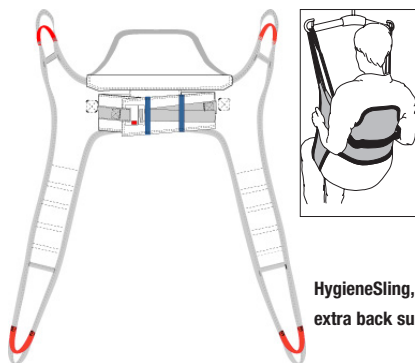

HygieneSling,
extra back support

HygieneSling est un harnais de levage qui est facile à mettre en place et qui facilite le travail du personnel soignant pour habiller ou déshabiller la personne pour faire sa toilette. Il est équipé de sections pour les jambes, ce qui permet à l'utilisateur de ne pas être assis sur le harnais, mais de bénéficier d'un appui dans le dos et sous les jambes.

HygieneSling est conçu pour assurer toutes les tâches de levage pour habiller ou déshabiller la personne. HygieneSling est disponible dans trois modèles : sans ceinture, avec ceinture, ainsi qu'un modèle avec ceinture et un dossier supplémentaire.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d'auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la situation de levage et des besoins du patient.



Contrôle de fonctionnement

Inspection visuelle et mécanique

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et vérifier qu'elles supportent une contrainte élevée. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.

Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.


Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l'auxiliaire de levage. Accrocher d'abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les jambes. Utiliser un étrier de levage éprouvé.

C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

Manual: 00850 Fr Ver. 6 120131


Mise en place du harnais de levage quand le patient est assis dans un fauteuil roulant ou sur un lit

Ce harnais de levage exige que la personne qui l'utilise ait une certaine capacité fonctionnelle. Si la personne a trop peu de tonus musculaire, elle risque de glisser du harnais. Faire attention.

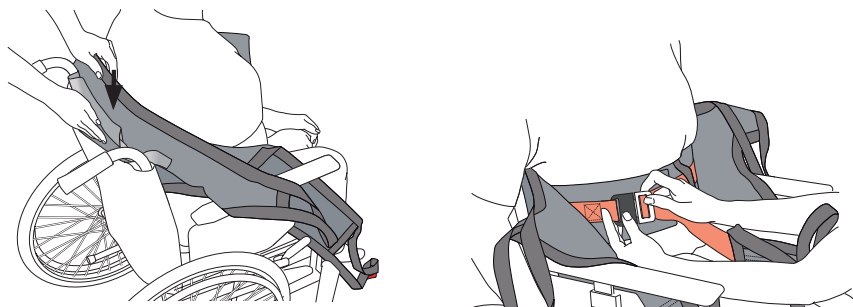

HygieneSling se place dans le dos, à environ 5-10 cm sous les aisselles, l'étiquette de marquage est le milieu du harnais de levage et doit suivre la colonne vertébrale de l'utilisateur. Pour faciliter la manipulation et si cela est possible, le patient peut se pencher légèrement vers l'avant.

Fermer la boucle – le « clic » indique qu'elle est correctement fixée. Tirer la sangle pour serrer la ceinture.

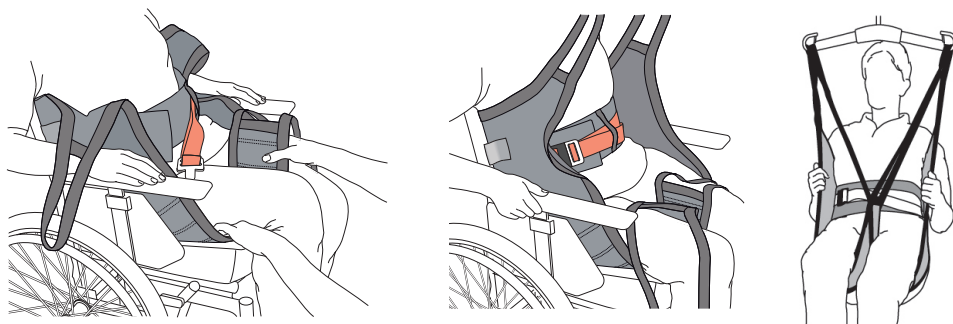


Placer les appuis pour les jambes sous les cuisses de l'utilisateur.

Croiser les appuis pour les jambes, enclencher les œilletons de la partie arrière avant les œilletons des appuis pour les jambes.

Commencer à lever l'étrier de levage, puis s'arrêter pour vérifier que tout est normal avant de soulever le patient de son support.



Ne pas lever plus que nécessaire.

Pour retirer le harnais de levage quand le patient est assis

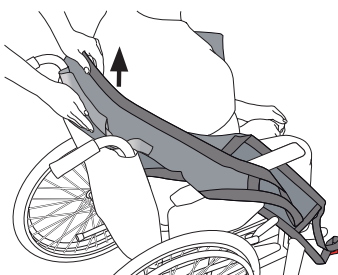

Replier l'appui pour les jambes sous la personne, puis l'extraire par l'extérieur des cuisses.
Faire monter le harnais de levage derrière le dos du patient.



Passage aux toilettes

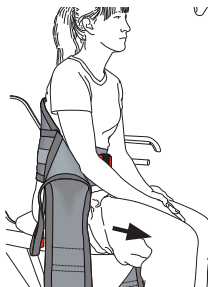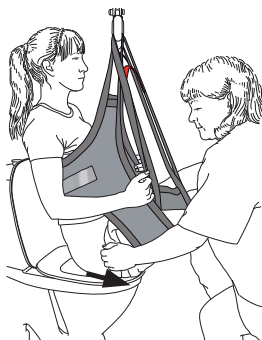

Avant de descendre l'utilisateur sur la cuvette de WC, lui baisser le pantalon aussi bas que possible vers les appuis pour les jambes.

Descendre l'utilisateur et décrocher les appuis pour les jambes. Continuer à lui baisser le pantalon.

Après le passage aux toilettes

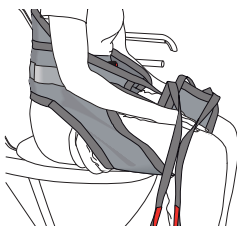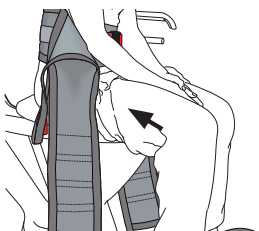

Le pantalon doit être remonté autant que possible vers l'entrejambes. Placer l'appui pour les jambes entre l'articulation des genoux et la taille du pantalon.

Lever l'utilisateur et remonter ensuite le pantalon. Ne pas lever plus que nécessaire.

Si l'utilisateur a besoin d'une couche-culotte, placer celle-ci à l'intérieur du pantalon avant de remettre celui-ci.

Matériaux :

Polyester : Matériau résistant et présentant une friction faible. Supporte des températures de lavage élevées.

Conseils d'entretien :

Lire l'étiquette-conseil du harnais de levage.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant.
Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

Information sur les tailles

Les harnais de levage peuvent souvent être utilisés pour suspension par 2 et 4 points. Il est important d'être prudent et de s'assurer que la largeur de l'étrier de levage est adaptée à la taille du harnais de levage et aux besoins de l'utilisateur. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, utiliser des harnais de levage individuels pour chaque utilisateur spécifique.

Taille		XXS/Gray	XS/Orange	S/Rouge	M/Jaune	L/Vert	XL/Lilas	XXL/Blanc
Poids brut rec.	lbs	22-66	55-99	88-132	121-187	165-220,5	198,5-286,5	264,5-375
de l'utilisateur	Kg	10-30	25-45	40-60	55-85	75-100	90-130	120-170
Hauteur du	inch	19,5	25,5	29,5	34	36,5	37,5	37,5
harnais de	cm	50	65	75	87	93	95	95
levage								

Charge maximale

Les différents composants de l'auxiliaire de levage assemblé (étrier de levage, harnais, pèse-personne et éventuellement autres accessoires de levage) peuvent avoir des charges maximales autorisées différentes. C'est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l'appareil de levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l'auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d'utiliser l'appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

