

Carico massimo: 300kg

Il supporto per il capo HeadSupport è un accessorio che si posiziona attorno al capo del paziente e si aggancia al bilancino, in modo da garantire un maggiore supporto al capo del paziente quando si utilizzano imbracature senza il supporto per il capo. HeadSupport è dotato di tre anelli su entrambi i lati in modo da poter scegliere l'anello con la lunghezza più adatta al paziente. Raccomandiamo di esaminare i diversi tipi di imbracature disponibili valutando la possibilità di optare per un modello dotato di supporto integrato per il capo.

Il sistema RoMedic è suddiviso in quattro categorie: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.



Controllo funzionale

Controllare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell'imbracatura, in particolare dopo ogni lavaggio.

Controllare che il tessuto non sia usurato, danneggiato o sbiadito.

In presenza di segni di usura, il prodotto non deve essere utilizzato e deve essere smaltito in caso di dubbi sulla sua sicurezza.



Leggere sempre le istruzioni


Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di assistenza utilizzati per il trasferimento del paziente.

Scegliere con attenzione la taglia dell'imbracatura, in modo da evitare disagi e il rischio che il paziente scivoli fuori dall'imbracatura. Se l'imbracatura è troppo larga, sussiste il rischio che il paziente scivoli fuori.


Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.

Applicare gli anelli posteriori dell'imbracatura prima di applicare gli anelli del supporto gambe. Usare sempre un bilancino appropriato.

Applicazione ed utilizzo

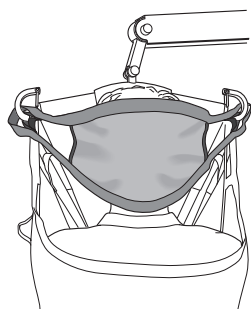

Posizionare il supporto HeadSupport attorno al capo del paziente e scegliere gli anelli più adatti da agganciare al bilancino.

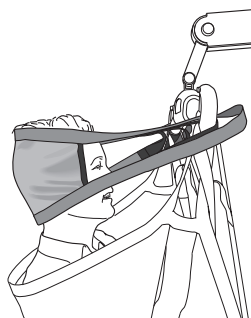

La scelta degli anelli deve tenere conto del comfort del paziente, infatti si deve garantire un adeguato supporto del capo senza però stringere eccessivamente.

Pulizia e manutenzione del prodotto:

Leggere l'etichetta del prodotto.



Non usare detersivi.
Per garantire la massima durata del materiale, asciugare l'imbracatura appesa o nell'asciugatrice a basso calore.

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni. Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito www.handicare.com. Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

