

Carico massimo: 300kg



L'imbracatura WalkingVest è facile da applicare e offre al paziente un senso di sicurezza e un valido supporto durante la deambulazione. È stata studiata per sostenere la parte superiore del corpo e a livello dell'inguine, tramite il supporto gambe, durante la deambulazione e quando il paziente si alza in posizione eretta. WalkingVest è stata progettata per rendere attivo il paziente in sicurezza e con il massimo comfort.

Il sistema RoMedic è suddiviso in quattro categorie: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.



Controllo funzionale

Controllare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell'imbracatura, in particolare dopo ogni lavaggio.

Controllare che il tessuto non sia usurato, danneggiato o sbiadito.

In presenza di segni di usura, il prodotto non deve essere utilizzato e deve essere smaltito in caso di dubbi sulla sua sicurezza.



Leggere sempre le istruzioni


Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di assistenza utilizzati per il trasferimento del paziente.

Scegliere con attenzione la taglia dell'imbracatura, in modo da evitare disagi e il rischio che il paziente scivoli fuori dall'imbracatura. Se l'imbracatura è troppo larga, sussiste il rischio che il paziente scivoli fuori.

Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.

Applicare gli anelli posteriori dell'imbracatura prima di applicare gli anelli del supporto gambe. Usare sempre un bilancino appropriato.

Descrizione dell'imbracatura WalkingVest:

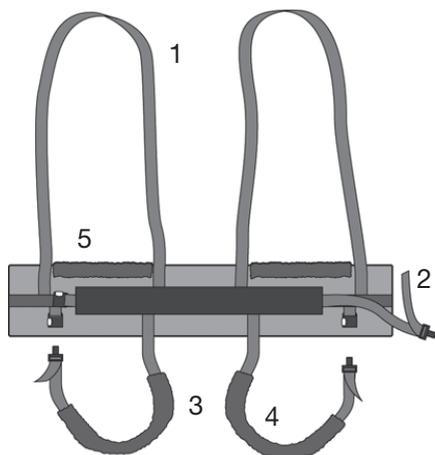


L'imbracatura WalkingVest è composta da:

1. Anelli di sollevamento (grigi)
2. Cintura (rossa)
3. Supporto gambe (nero)
4. Imbottitura per supporto gambe
5. Imbottitura per l'imbracatura

Gli anelli di sollevamento si agganciano al bilanciamento. La cintura e il supporto gambe sono dotati di una fibbia ad aggancio/sgancio rapido per una facile applicazione. Il supporto gambe si applica attorno alle cosce, dalla parte posteriore a quella anteriore. Il supporto gambe è imbottito in modo da evitare compressioni e irritazioni all'inguine. L'imbracatura è imbottita anche all'altezza delle braccia per evitare compressioni e irritazioni.

Applicazione dell'imbracatura WalkingVest quando il paziente

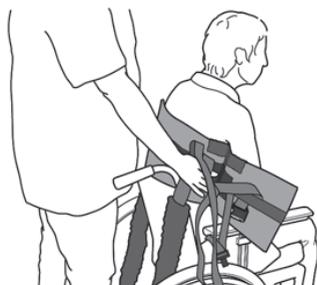

1. Applicare WalkingVest attorno alla parte superiore del corpo con la fibbia davanti. Il bordo inferiore è posizionato sopra le anche. Le braccia si lasciano fuori. La sezione centrale deve trovarsi in corrispondenza della colonna vertebrale del paziente.



2. Applicare la cintura e regolarla in base alla taglia del paziente.

Applicazione del supporto gambe in posizione seduta:



1. Quando si applica l'imbracatura attorno alla parte superiore del corpo del paziente, il supporto gambe si applica partendo da un lato e spingendolo sotto le cosce.



2. Fissare il supporto gambe anteriormente.



3. Regolare il supporto gambe in base alla taglia del paziente.

Sollevamento del paziente in posizione eretta:



1. Preparare il paziente spiegandogli la procedura. Non lasciare mai il paziente da solo durante il sollevamento. Prestare sempre la massima attenzione ai segnali del paziente. Arrestare il sollevamento se il paziente si sente scomodo.



2. Quando il paziente è in posizione eretta, è possibile usare un ausilio per la deambulazione.

Materiale:

Poliestere: materiale resistente a basso attrito.

Pulizia e manutenzione del prodotto:

Leggere l'etichetta del prodotto.



Non usare detersivi.
Per garantire la massima durata del materiale, asciugare l'imbracatura appesa o nell'asciugatrice a basso calore.

Informazioni sulla taglia

Misura		XXS/grigio	XS/ arancione	S/rossa	M/gialla	L/verde	XL/porpora	XXL/ bianco
Misura dell'imbracatura	cm	60	70	82	96	110	122	142
	pollici	24	27,5	32	38	43	48	56
Racc.	lbs	33-88	44-110	88-132	121-176	165-220	198-243	220-287
Peso paziente	kg	15-40	25-50	40-60	55-80	75-100	90-110	100-130

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni. Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito www.handicare.com. Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8-557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

