
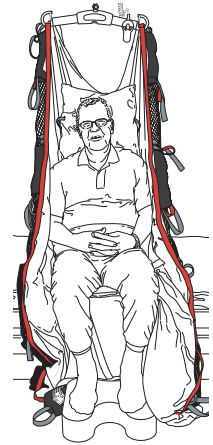
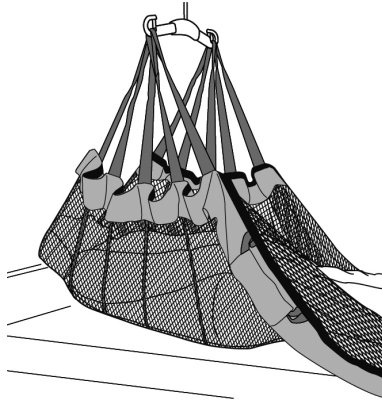


# SafeHandlingSheet

SystemRoMedic™

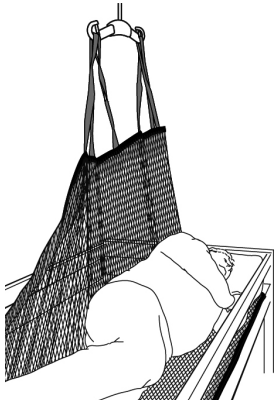

**Maximale belasting: 300 kg, 400 kg, 570 kg**

SafeHandlingSheet is een laken dat gebruikt kan worden voor herpositionering in bed met zowel vaste als mobiele liften. Het laken heeft zestien ophangpunten, acht aan iedere kant van de patiënt. SafeHandlingSheet is ontworpen voor het herpositioneren van patiënten in bed.

SystemRoMedic heeft een groot aantal functionele en comfortabele tilbanden van hoge kwaliteit die kunnen worden aangepast voor verschillende tiltechnieken en voor patiënten met verschillende behoeften. De tilbanden zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en maten, variërend van XXS tot XXL. Alle modellen zijn veilig en zeer gemakkelijk te gebruiken en zijn geschikt voor het tillen van patiënten met een gewicht van maximaal 300 kg. De keuze van model en materiaal is afhankelijk van de behoeften van de patiënt en de verplaatsingssituatie.



## Functionele inspectie

### Visuele en mechanische inspectie

Controleer de toestand en het functioneren van de tilband regelmatig. Inspecteer het product altijd na het wassen. Controleer of de naden en het materiaal niet beschadigd zijn. Controleer of de stof niet versleten of vervaald is. Belast het apparaat en controleer of alle klemmen, handgrepen, enz. bestand zijn tegen zware belasting. Als er tekenen van slijtage zijn, mag het product niet meer gebruikt worden.



## Lees altijd de handleiding

Lees de handleidingen van alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmiddelen.

Bewaar de handleiding zodat deze voor gebruikers van het product bij de hand is.

Laat een patiënt tijdens het verplaatsen nooit zonder toezicht.

Kijk om te voorkomen dat de patiënt oncomfortabel is of uit de tilband glijdt altijd goed of de tilband goed past. Bevestig eerst de achterste lussen van de tilband aan het tiljuk en breng vervolgens de steunlussen aan. Gebruik een tiljuk dat getest is.

Het onderdeel met de laagste maximale belasting is altijd bepalend voor de maximale belasting van het gehele systeem.

Controleer voor gebruik altijd de maximale belasting voor de lift en de accessoires. Neem bij vragen contact op met uw leverancier.

## Beschrijving van SafeHandlingSheet:



SHSheet L Polyester nät/WendyLett4Way

SafeHandlingSheet heeft tilbanden aan beide zijden.  
Om de hantering door de zorgverlener gemakkelijker te maken, zijn de tilbanden afwisselend grijs en zwart.


De tilbanden hebben drie verschillende lussen met verschillende kleuren: grijs, rood en zwart.

SafeHandlingSheet is gemarkeerd met een label om te laten zien welke kant omhoog geplaatst moet worden in bed: "This side up". Het label markeert tevens het midden van het laken.



SHSheet L Polyester nät


Wanneer de herpositionering voltooid is, kunnen de banden ingesloopt worden onder het matras of in de zijzakken gestopt worden.

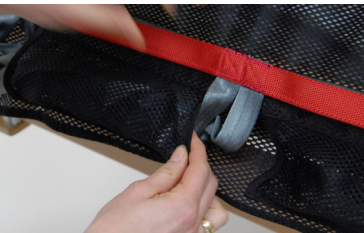

### Tip!

- Gebruik met gewone lakens boven op SafeHandlingSheet.
- Plaats de gebruikers in het midden van SafeHandlingSheet.
- Dankzij het extra materiaal van SafeHandlingSheet kan de gebruiker verschillende keren geherpositioneerd worden voordat de gebruiker geherpositioneerd hoeft te worden op SafeHandlingSheet.
- Aanbevolen voor gebruik met plafondliftsystemen met traverse rail (x-y-as).
- Overweeg indien mogelijk in eerste plaats het bed te verplaatsen in plaats van de gebruiker te duwen/trekken wanneer hij/zij wordt opgetild van het oppervlak.


## SafeHandlingSheet gebruiken:

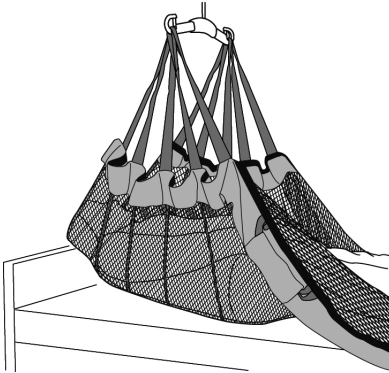

### Hoger in bed:

De vijf bovenste banden aan beide kanten (of zoveel banden nodig zijn om de wrijvingspunten te dekken) worden aan het tiljuk gehaakt.

Breng de lift omhoog en beweeg de patiënt hoger in bed wanneer het gewicht van de wrijvingspunten is weggenomen.

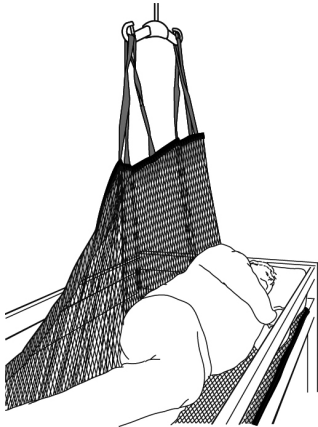

### Draaien in bed:

Als de gebruiker na het draaien in het midden van het bed gepositioneerd moet worden, wordt u aangeraden de gebruiker eerst te herpositioneren (zie: Hoger in bed) naar één kant van het bed en de gebruiker vervolgens naar het midden van het bed te rollen. Voor het uitvoeren van de rol maakt u de vier middelste banden aan een kant van SafeHandlingSheet vast aan het tiljuk (aan de tegenovergestelde kant van de richting van de rol). Als er geen zijheksen gebruikt worden, dient aan elke kant van het bed een zorgverlener te staan voor de veiligheid van de gebruiker. Breng de lift omhoog om de patiënt voorzichtig naar het midden van het bed te draaien.



### SafeHandlingSheet verwisselen:

Wanneer een oud exemplaar van SafeHandlingSheet vervangen wordt door een nieuw, begint u te tillen zoals hiervoor wordt beschreven. Wanneer de gebruiker vrij van het bed hangt, plaatst u een nieuw SafeHandlingSheet in het midden van het bed.

Laat de gebruiker weer op het bed zakken en maak het oude SafeHandlingSheet los van het tiljuk. Maak het nieuwe SafeHandlingSheet vast aan het tiljuk en rol de gebruiker op de zij (zie: Draaien in bed) en stop het oude SafeHandlingSheet opgerold achter de gebruiker, rol de gebruiker vervolgens terug op het bed. Voer in tegengestelde richting nog een draai uit met het nieuwe SafeHandlingSheet en trek het oude SafeHandlingSheet achter de gebruiker vandaan en rol de gebruiker weer op het bed.

## Van zitten naar stand – vanuit een zittende positie op de rand van het bed

**Opmerking!** Voor deze procedure om op te staan uit zittende positie, moet de patiënt in staat zijn op de rand van het bed te zitten. Breng het bed omlaag, zodat de patiënt zijn/haar voeten stevig op de vloer kan plaatsen bij het zitten op de rand van het bed. Gebruik een krukje als het bed te hoog is.

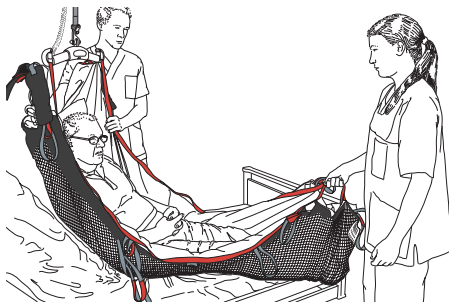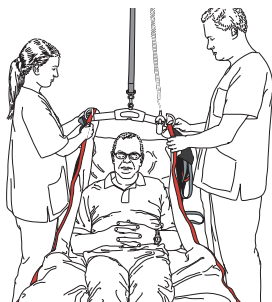

Bereid de patiënt voor op het omhoog komen.

Breng de rugsteun van het bed omhoog en bevestig de bovenste handgrepen aan het tilkuk.

Eén zorgverlener dient de handgrepen aan het voeteneinde te pakken. Begin door de lift omhoog te brengen.

De zorgverlener tilt de benen van de patiënt over de rand van het bed en plaatst de voeten op de vloer.

Zorg dat de patiënt stevig op de rand van het bed kan zitten. De knieën en heupen moeten even hoog zijn.

Plaats een geschikt steun- of looprek voor de patiënt om deze te helpen staan.

### Product belasting

Product	Art.nr.	Afmetingen	Materiaal	Max.
SHSheet L poly net	47522007	240 x 115	Polyester net: Luchtig, goed ventilerend materiaal	300 kg
SHSheet XL poly	47502008	240 x 115	Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving	400 kg
SHSheet XXL poly/ versterkt	47502009	240 x 130	Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving	570 kg
SHSheet L poly net/ WendyLett4Way	47542007	240 x 115	Polyester net: Luchtig, goed ventilerend materiaal WendyLett4Way: Bedlakenstof onder de patiënt	300kg

### Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasverzachters.  
Niet in de droger drogen om de levensduur van het product te verlengen.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier als u vragen heeft over het product en het gebruik ervan. Zie [www.handicare.com](http://www.handicare.com) voor een volledige lijst met leveranciers. Zorg dat u altijd beschikt over de juiste versie van de handleiding. U kunt de recentste versies van handleidingen downloaden van onze website, [www.handicare.com](http://www.handicare.com).

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

