


BackBoardStrap

SystemRoMedic™



Manual - Svenska

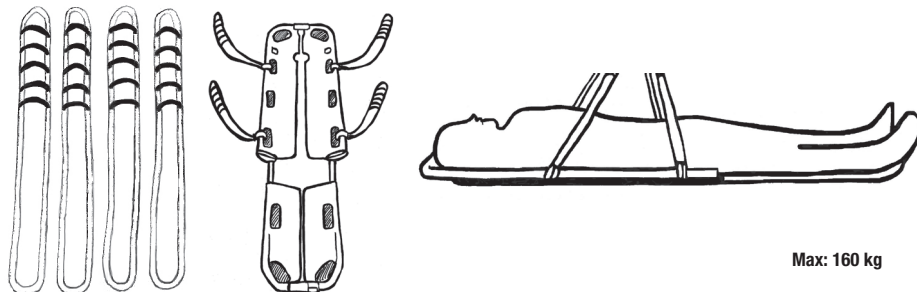

Max: 160 kg

BackBoardStraps är utvecklade för att tillsammans med Ferno Scoop Stretcher 065 EXL möjliggöra mekaniskt lyft med en manuell bår inom akutsjukvård. Banden skall vara monterade på Ferno Scoop Stretcher enligt denna instruktion.

BackBoardStraps består av fyra fristående lyftband med 6 alternativa upphängningsöglor på ena sidan av varje band för att kunna balansera båren under lyftet. BackBoardStraps öglas fast i handtagshålen (två på vardera sida) och appliceras sedan på lyftbygelns krokar.

I SystemRoMedic finns ett brett urval av funktionella, bekväma och högkvalitativa lyftselar anpassade för olika typer av lyft och för brukare med olika behov. Lyftseldarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Alla modeller är både säkra och mycket lätta att använda och de klarar brukare upp till 300 kg. Valet av modell och material styrs av lyftsituationen och brukarens behov.



Kontroll av funktion

Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.



Läs alltid manualen

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.


Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Undvik urglidningsrisk eller obehag genom att vara noggrann vid utprovning av lyftselen. Haka först på lyftseldens ryggöglor på lyftbygel, haka därefter på benstödens öglor. Används utprovad lyftbygel.

Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.

Applicering och användning

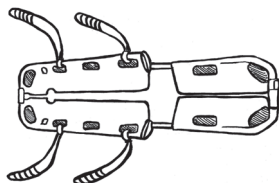

Banden fästs i hålen på sidorna om bårn i höjd med patientens höfter och skuldror.

De monteras genom att banden dras genom hålet och sedan genom sig själv som en ögla.

Banden monteras två på vardera sida om bårn och appliceras sedan på lyftbygel. Anpassa bredden på lyftbygel efter brukaren för att undvika obehag.

Genom att välja någon av de sex alternativa lyftöglorna balanseras bårn före lyftet.

Starta lyftet, stoppa och se så att bårn är välbalanserad i horisontellt läge. Om den är det fortsatt lyftet, om inte sänk ner och reglera med öglealternativen.

Individuellt test måste utföras vid varje lyftsituation för att säkerställa att lyftet är balanserat.



Var noggrann med horisontellt läge!

Använd alltid säkerhetsbältena enligt manualen för Ferno Scoop Stretcher!

Före lyft:

Läs och följ manualen för Ferno Scoop Stretcher.

Planera lyftet och besluta om hur många medhjälpare som behövs för ökad säkerhet.


Lyft aldrig högre än nödvändigt.

Lämna aldrig brukaren under lyftmomentet.

Måttangivelse

A: 110 cm

B: 8 cm

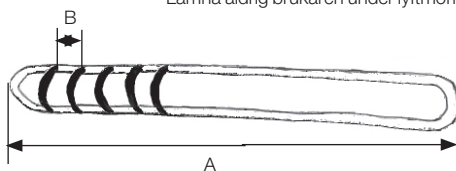

Skötselråd:

Läs på lyftselens märketikett.



Använd inte sköljmedel.
Undvik torktumlning för ökad livslängd.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

