

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T


med SmartPark-funktion

SystemRoMedic™

REF

50100052 (RiseAtlas450T)

50100053 (RiseAtlas625T)

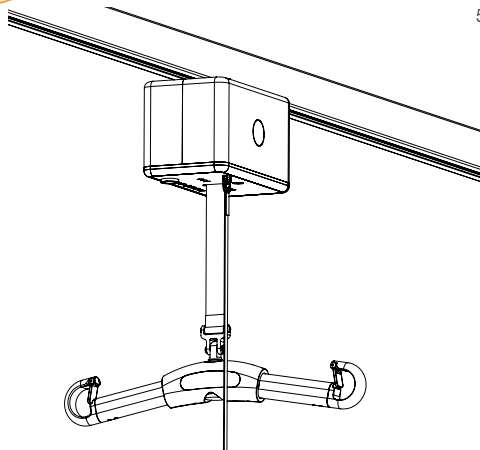**Maks:****RiseAtlas450T: 205 kg****RiseAtlas625T: 285 kg**

Loftløfteren RiseAtlas er udviklet til, i kombination med det rigtige tilbehør, nemt at forflytte en bruger mellem to enheder. Loftløfteren monteres i et egnet skinneresystem for at dække de tilstedeværende behov. Skinneresystemet kan bestå af en enkelt skinne med eller uden kurver, eller et rumdækkende skinneresystem. Det er også muligt at forflytte brugeren mellem to rum. RiseAtlas450T/625T med SmartPark-funktion er udstyret med indbygget fremdriftsmotor. SmartPark-funktionen indebærer, at løftemodulet kan flyttes til parkeringspladsen og oplades med et enkelt tryk på håndbetjeningen.

I Handicare's produktserie SystemRoMedic indgår blandt andet løftere og løftesejl. SystemRoMedic indebærer et helhedssyn på forflytninger inddelt i fire kategorier: forflytning, positionering, støtte og løft.



Funktionskontrol

Visuel inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

Før brug:

Kontroller, at løfteren er monteret korrekt.

Kontroller, at loftskinnen er udstyret med endestop.

Kontroller fastgørelsen af løftebøjlen samt afkrogningsbeskyttelsens funktion.

Kontroller løftebevægelsen.



Læs altid manualen

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes til en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Løfteren må kun anvendes af personer, der er uddannede i håndtering af løfteren.

Indholdsfortegnelse

Montering	3-6
- Oppakning og kontrol	3
- Transport og opbevaring	3
- Installation af loftløfter	3-5
- Forskellige skinnesystemer	6
- Endelig inspektion	6
At bruge produktet	7-14
- Vigtig information	7
- Før brug	7
- Max. belastning	8
- Beskrivelse af funktioner og symboler	8
- Opladning af loftløfteren	9
- SmartPark-funktion	10
- Håndbetjening	11
- Informationspanel	12
- Forebyggende service/vedligehold	12
- Nødstop	13
- Elektrisk nødfir	13
- Manuelt nødfir/hævning	13
- Fejlsøgning	14
Tilbehør	15
Vedligehold	16
Teknisk information	17-18
- Detaljeret beskrivelse	17-18

Montering

Oppakning og kontrol

I pakken med RiseAtlas indgår følgende:

- 1 stk. RiseAtlas loftløfter
- 1 stk. Håndbetjening
- 2 stk. Manualer - Brugermanual, Monteringsanvisning til sikring
- 1 stk. Opladningsstation
- 1 stk. Nøgle til manuelt nødфир (sidder i coveret).

Kontroller, at der ikke ligger nogen dele tilbage i emballagen.
Efterse løfteren for at finde eventuelle tegn på skader.

Transport og opbevaring

Inden RiseAtlas leveres, afmonteres sikringen fra loftløfteren for at sikre, at batteriet ikke aflades under transport og længere tids opbevaring.



Monter sikringen på plads i loftløfteren iht. den medfølgende monteringsanvisning.

Installation af loftløfter

BEMÆRK! Loftløfteren skal installeres og kontrolleres af autoriseret personale iht. instruktioner fra Handicare AB. Periodisk inspektion skal udføres mindst en gang om året. Anvend kun originale reservedele. Service og vedligehold skal udføres iht. anvisninger i manualen.

Inden loftløfteren tages i brug første gang, skal den oplades i mindst tre timer. Løfteren leveres med sikringen afmonteret. Før første installation åbnes coveret, og der monteres en 20A fladsikring. Sikringen leveres i pose. Som standard er loftløfteren indstillet til opladning i skinnen ved levering. Ved installation til opladning i skinnen skal skinnerne i systemet suppleres med strømskinner. Vær forsigtig ved installation af loftløfteren, så opladningshjulene ikke får kontakt med skinnen. Forkert installation kan forårsage kortslutning og ødelægge opladningsenheden.




Ændring af opladningsalternativ skal udføres af autoriseret personale iht. instruktioner fra Handicare AB

Snor til nødstop







Når løfteren er installeret i skinnesystemet, skal der foretages en justering af snoren til nødstoppet. Snoren til nødstoppet skal justeres til en højde, hvor den ikke forstyrrer hjælperen ved et normalt løft, samtidig med at snoren er nem at komme til for alle brugere. Snoren klippes af med en saks og brændes for enden, så den ikke trevler.

Vi anbefaler en højde på 1800 mm over gulvet.

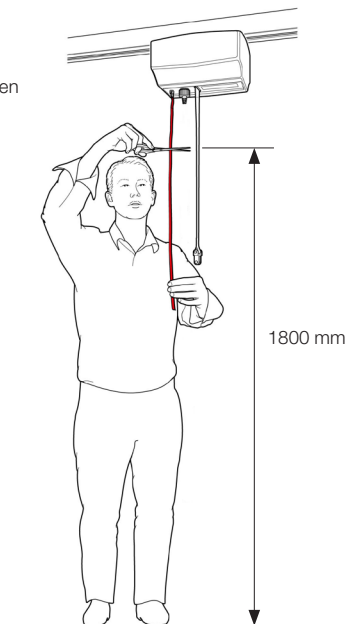

Opladning for enden af skinnen


- 1) Kontroller at opladningspunkterne er indstillede til opladningsstation; opladningspladen holdes sammen med fjederstift, se billede 1.
- 2) Kontroller at opladningspladen fjedrer ind og ud ved at trykke opladningspladen sammen, se billede 2.
- 3) Før løftemodul ind i skinnen, så plus på opladningspunktet kommer på højre side iht. billede 3.
- 4) Monter ladekontakt iht. billede 4. BEMÆRK! Tryk ladekontakten ca. 50 mm ind (A), hvis der kun anvendes stopbolt. Ved brug af justerbart endestop trykkes ladekontakten ca. 90 mm ind.
- 5) Monter de medfølgende skruer, som holder ladekontakten, se billede 5 (B).
- 6) Slut det røde kabel til ladekontakten på højre side, opladningspladens plusside, og det sorte kabel på venstre side iht. billede 6.
- 7) Monter det valgte endestop i skinnen.

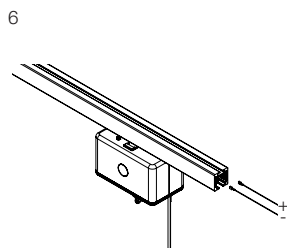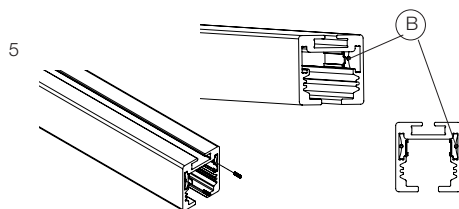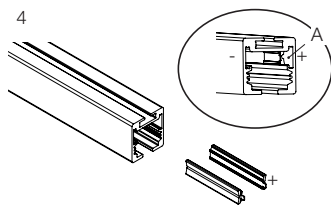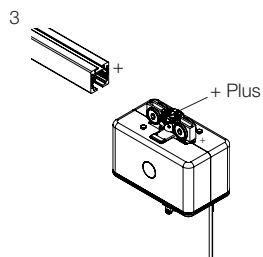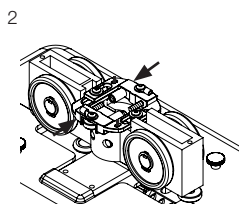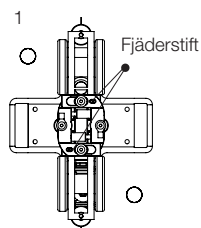


Forskellige skinneresystemer

Valg af skinneresystem afgøres af det aktuelle behov:

H-system i soveværelse og badeværelse

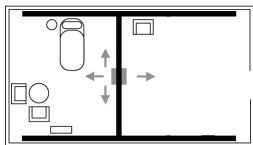

Lige bane, kurver, skinnereskit

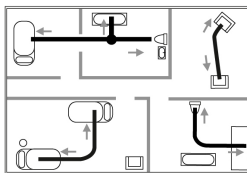

Fritstående lige bane



Endelig inspektion

- Loftløfteren skal installeres og kontrolleres af autoriseret personale iht. instruktioner fra Handicare AB. Periodisk inspektion skal udføres mindst en gang om året. Anvend kun originale reservedele. Service og vedligehold skal udføres i henhold til anvisninger i manualen.
- Kontroller, at der ikke ligger nogen dele tilbage i emballagen.
- Efterse løfteren for at finde eventuelle tegn på transportskader.
- Kontroller at nødstopet fungerer ved at trække det ud og derefter trykke på op- eller nedknappen. Hvis der ikke sker noget, fungerer nødstopet.
- Kontroller at løftestroppen ikke udviser tegn på skader samt kontroller, at der ikke er nogen sømme, der er gået op. Tryk på op-knappen, og kørløftestroppen hele vejen op. Tryk derefter på ned-knappen, og kørløftestroppen hele vejen ned.
- Test løfterens funktion ved at løfte en person (ikke brugeren) med godkendt løftesejl. Kontroller samtidig, at nødfiret fungerer med en person i løfteren, se kapitlet om nødfir.
- Kontroller at loftsinnen er udstyret med endestop!
- Kontroller at håndbetjeningens ledninger ikke udviser tegn på slitage.
- Kontroller at håndbetjeningens markeringer stemmer overens med løfterens funktioner.
- Personer, der anvender løfteren, skal altid være opmærksomme på og rapportere alle usædvanlige lyde og vibrationer.
- Aktiver SmartPark-funktionen. Sørg for, at løftemodulet kører til parkeringspladsen (P), og aktiver opladningen. 

BEMÆRK!

Inden løfteren tages i brug første gang, skal den oplades i mindst tre timer. Se kapitlet Opladning af loftløfteren.

RiseAtlas leveres med nødstopet aktiveret for at sikre, at batteriet ikke aflades under transport og længere tids opbevaring.

Opbevar manualen tilgængelig for personer, som anvender produktet.

Opbevar altid nøglen til nødfir i nærheden af løfteren. Alle, som anvender løfteren, skal være informerede om, hvor nøglen opbevares. BEMÆRK! Sidder på siden af løftemodulet ved levering.

At anvende produktet



Vigtig information

- Personen, der anvender løfteren, skal være professionelt uddannet og have god forståelse for og viden om forflytning af brugere med hjælpemidlet. Det er vigtigt at anvende korrekt tilbehør og de rette arbejdsteknikker ved forflytningen. Det er også vigtigt at aldrig efterlade brugeren alene under forflytningen.
- Garantien er kun gyldig, hvis reparationer eller ændringer udføres af autoriseret personale.
- RiseAtlas må ikke komme i direkte kontakt med vand.
- RiseAtlas må ikke oplades i vådrum.
- For optimal funktion skal løfteren efterses regelmæssigt. Se kapitlet Vedligehold.
- Max. belastningen må under ingen omstændigheder overskrides. Se under Teknisk information og på mærkaten på løfteren.
- Løftetilbehøret skal være korrekt afprøvet i forhold til brugerens behov og funktioner.
- Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug af stærke strømkilder som diatermi og lignende. Så f.eks. diatermikabler ikke placeres på eller i nærheden af apparatet. Ved usikkerhed rådføres med den udstyrsansvarlige eller leverandøren.

Før brug

- Efterse løfteren for at opdage eventuelle tegn på skader.
- Kontroller at håndbetjeningen ikke udviser tegn på slitage.
- Kontroller at håndbetjeningens markeringer stemmer overens med løfterens funktioner.
- Kontroller batteristatus.
- Kontroller løftestroppen for at opdage eventuelle tegn på skader.

Max. belastning:

Der kan forekomme forskellige tilladte max. belastninger for produkter i den sammensatte løfteenhed (løfter, ophængs-bøjle, løftesejl, vægt og eventuelt andet løftetilbehør). Det er altid den lavest tilladte max. belastning på det respektive produkt i den sammensatte løfteenhed, der styrer. Kontroller altid den tilladte max. belastning på løfter og løftetilbehør inden brug, og kontakt din forhandler ved spørgsmål.

Beskrivelse af funktioner og symboler

RiseAtlas har mange forskellige indbyggede funktioner. Hver funktion forklares i det respektive afsnit i manualen, alternativt i manualen for det aktuelle tilbehør. Nedenfor findes en kort forklaring på, hvilke funktioner som er tilgængelige for personer, der anvender løfteren, og brugere.

Label symboler

	Læs manualen.		Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald
	Overensstemmelse med direktiv 93/42/EEF		Type B, iht. beskyttelsesgrad mod elektrisk stød.
	Apparatet er beregnet til indendørs brug.		Klass II udstyr.
	Conforms to ISO 10535:2006 with ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 and is certified to ISO 10535:2006 with CSA-C22.2 No. 60601-1:08		Læs altid manualen


Produkt symboler

	Batteristatus		Nødstop
	Hvornår løfteren har brug		Retningsviser køremotor
	Vedligehold		Advarsel! Læs manualen.
	Læs manualen		

Opladning af løftmotoren

RiseAtlas oplades med en separat opladningsenhed, som sluttes til opladningskablerne via et DC-stik. Husk, at opladningskablet er løst og let kan forveksles med andre opladningskabler. Kontroller at det korrekte opladningskabel anvendes, se under Teknisk information. For montering af opladningsenhed, se under Montering af opladningsenhed.

Placer løfteren i opladningsstationen for enden af skinnen. Kontroller at batterisymbolet tændes på løfteren.

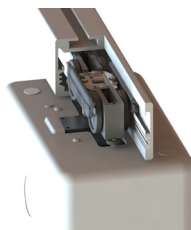


Batteristatus opladningsstation

Batterisymbolet lyser grønt, når der er mere end 50 % af kapaciteten tilbage. Hvis batterisymbolet blinker orange, når løfteren startes, skal batteriet oplades. Hvis batterisymbolet lyser orange, og der samtidig lyder en pibelyd, når løfteren køres opad, så er batteriet afladet og skal lades op omgående. Når løfteren placeres i opladningsposition, lyser symbolet for batteriet grønt i 15 minutter. Den separate opladningsenhed angiver også opladning via en farvet lampe. Når løfteren er fuldt opladet, lyser opladningsenhedens lampe grønt. Når løfteren aktiveres, lyser batterisymbolet op i to sekunder for at vise aktuel batteristatus.

Batteristatus skinneopladning

Symbolet for batteriet lyser grønt, når der er mere end 50 % af kapaciteten tilbage. Når løfteren aktiveres, lyser symbolet for batteriet grønt i 15 minutter. Hvis batteriet samt bogsymbolet blinker orange, når løfteren startes, er opladningssystemets strømkreds brudt og skal efterses af en tekniker.

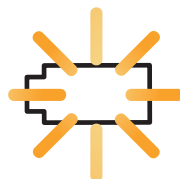

BEMÆRK!

Anvend kun den oplader, som hører til loftløfteren. Oplad batterierne regelmæssigt for maksimal levetid. Lad ikke batteriets opladningsniveau falde til under 25 %, orange symbol på kontrolpanelet. Nødstopet må ikke være aktiveret ved opladning.



Batteriskift må kun udføres af autoriseret, godkendt personale.

SmartPark-funktion

SmartPark-funktionen inneb r att lyftmotorn kan  ka tillbaka i laddningsl ge bara genom ett enkelt tryck p  SmartPark-funktionen inneb rer, att l ftemodul t kan k re tillbaka til opladningspunktet med et enkelt tryk p  h ndbetjeningen. P  skinnen er der et symbol med et "P", hvortil l ftemodul t k rer til opladning.



Brug

Begynd med at justere oph ngsb jlen til den h jde, hvor den skal v re under opladning p  parkeringspladsen.

N r SmartPark aktiveres via h ndbetjeningen, h res en lyd; placer nu h ndbetjeningen p  oph ngsb jlen. Oph ngsb jlen begynder at h ves; n r den er h vet til toppen, flyttes l ftemodul t til parkeringspladsen. N r l ftemodul t er standset p  parkeringspladsen, s nkes oph ngsb jlen til den h jde, som blev valgt, inden SmartPark-funktionen blev aktiveret.

Sikkerhedsforskrifter

Inden SmartPark aktiveres, er det vigtigt at s rge for, at der ikke er placeret nogen genstande langs hele skinnens l ngde.

S rg ogs  for, at oph ngsb jlen har fri plads til at h ves helt op til toppen.


Loftl fteren har et sikkerhedssystem, som m rker, hvis noget er efterladt i l ftesejlet, og kan ikke l fte mere end 10 kg, n r SmartPark er aktiveret.

Advarsel

Var ekstra forsigtig, n r SmartPark-funktionen anvendes. Det er vigtigt aldrig at forlade l fteren under selve forflytningen.

Aktivering


SmartPark aktiveres ved at trykke p  venstre og h jre pil samtidig. Knapperne holdes inde, til der h res et bip (ca. 4-5 sekunder).

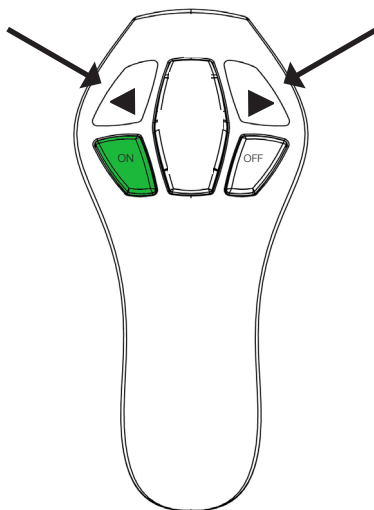

Håndbetjening


Tilslutning af håndbetjening til løftløfteren:

Udtaget til håndbetjeningen er placeret på undersiden af løftemodul-
let, billede 1. Tryk kontakten ordentligt ind.

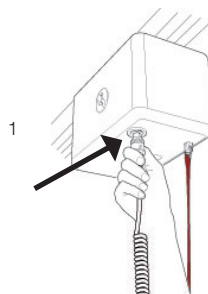


Hæve/sænke:

Knapperne med de sorte pile hæver og sænker løftestrop-
pen. Bevægelsen standser, så snart man slipper trykknappen billede (2).

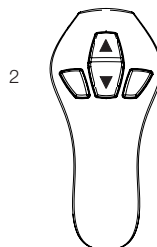

On/Off via håndbetjening

Håndbetjeningen er udstyret med en grøn (ON) knap til at tænde
løfteren og en knap til at slukke løfteren (OFF), billede 3. Løfteren
slukker automatisk efter ca. 15 minutters inaktivitet. Normalt skal
løfteren aktiveres via den grønne (ON) knap før brug. Når løfteren
slukkes, høres en lyd for at gøre hjælperen opmærksom.

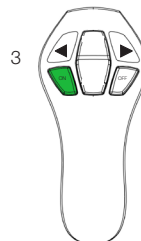

Aktiver/start løftmotoren

Løfteren tændes ved at trykke på den grønne (ON) knap på håndbetjeningen.
Et batterisymbol tændes i ca. 2 sek. for at vise batteristatus.
Hvis lampen ikke tændes, kontroller at nødstopet ikke er trykket ind.


Aktiv sikkerhed

RiseAtlas har en indbygget beskyttelse af strop-
pen, hvilket gør, at løftestrop-
pen skal være belastet med en vægt på min. 2 kg for at kunne manøvreres op eller
ned. Denne sikkerhedsdetalje findes for at undgå, at strop-
pen køres ind eller ud
ubelastet, hvilket kan give anledning til kortere fald i senere løftesituationer.

RiseAtlas stopper automatisk, når løftestrop-
pen er ubelastet, f.eks. når
ophængsbojlen køres ned på en seng. Hvis dette sker, skal løftestrop-
pen strækkes for at kunne køres ned eller op.

Hvis løftestrop-
pen snor sig ved et løft, slår RiseAtlas automatisk fra og kan kun
manøvreres ned.

For at spare batteri slukkes løfteren automatisk efter ca. 15 minutters inaktivitet.

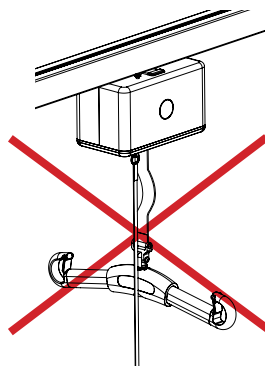

Oplysningspanel

Kontrolpanelet på løftemodulets underside viser en række forskellige symboler. Symbolerne lyser op, når en funktion aktiveres. Mere information om de respektive funktioner findes nedenfor eller under afsnittet Fejlsøgning.

Batteristatus

Batteristatus vises i 2 sek., når en løfter med opladning for enden af skinnen aktiveres, og i 15 minutter, hvis løfteren har opladning i skinnen.



Service/vedligehold

Information om service og vedligehold. Symbolerne aktiveres, når løfteren har været i brug i 12 måneder.



Overbelastningsbeskyttelse

RiseAtlas er udstyret med en overbelastningsbeskyttelse, som forhindrer, at løfteren løfter mere end max. belastningen. Et symbol for overbelastning samt advarselstrekanten tændes, og der høres også en lyd. Når dette symbol aktiveres, er det et tegn på, at personen er for tung.



Læs manualen

Bogsymbolet aktiveres, når det er nødvendigt at se i manualen. Bogsymbolet tændes ofte i forbindelse med et andet symbol for at angive, at manualen bør læses, inden løfteren anvendes igen.



Natlys

RiseAtlas er udstyret med natlys, som aktiveres ved, at ON-knappen på håndbetjeningen holdes nede i 3 sek. LED-lampen lyser i 15 min., hvis den ikke de-aktiveres via OFF-knappen på håndbetjeningen.



Nødstopfunktion

Visse modeller af RiseAtlas er udstyrede med et ekstra tilbehør, som gør, at et symbol tændes i 30 sek., hvis nødstopfunktionen aktiveres. Denne lampe lyser, hver gang motoren aktiveres via håndbetjeningen.



Advarsel

Advarselstrekanten aktiveres, når det er nødvendigt at se i manualen. Advarselssymbolet tændes ofte i forbindelse med et andet symbol for at angive, at manualen bør læses, inden løfteren anvendes igen. Som regel skal der tilkaldes en tekniker, når dette symbol er aktiveret.



Forebyggende service/vedligehold

Når løftemotoren har været i brug i 12 måneder, tændes symbolet for service/vedligeholdelse automatisk. Kontakt en af Handicare godkendt servicetekniker for vedligehold og nulstilling.


Nødstop

For aktivering af nødstop: Træk fast i det røde nødstopsbånd, billede 1, og slip derefter båndet.

Ved nulstilling: Tryk knappen til nødstopsbåndet tilbage i oprindelig placering, billede 2.



Hvis nødstopsbåndet holdes konstant nedtrukket, aktiveres det elektriske nødfir. Når båndet slippes, vender løfteren tilbage til nødstopplacering.

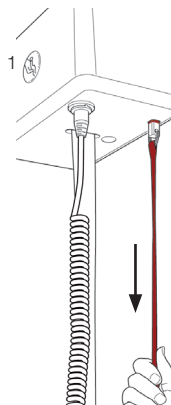


Elektrisk nødfir

Hvis håndbetjeningen ikke fungerer, kan elektrisk nødfir aktiveres ved, at nødstopsbåndet holdes nedtrukket, billede 1. Sænk brugeren til en sikker højde og plads.



Elektrisk nødfir skal kun anvendes, hvis håndbetjeningen ikke fungerer. Det elektriske nødfir kører løftestroppen ud, så længe nødstopsbåndet er trukket ned. Vær opmærksom på, at der sker en sænkebevægelse. Hvis ikke skal det elektriske nødfir afbrydes. Sørg altid for, at nødfir sker til en egnet plads.

Ved nulstilling: Tryk plastknappen, som det røde bånd er fastgjort i, opad, så det klikker, billede 2.


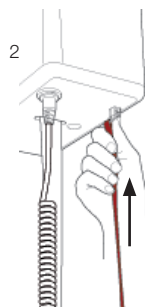


Manuelt nødfir/hævning

Fjern det plastcover, som sidder på samme side som nødstopsbåndet, billede 3. På indersiden af coveret findes en unbrakonøgle. Tag unbrakonøglen, og placer den i det dertil beregnede hul iht. billede 4. Drej derefter med uret for sænkning og mod uret for hævnings af ophængsbojlen. Sørg altid for, at nødfir sker til en egnet plads.

BEMÆRK! Sænkningen sker meget langsomt.

Ved nulstilling af manuelt nødfir/hævning: Kontakt en af Handicare godkendt servicetekniker. Anvend ikke løfteren.

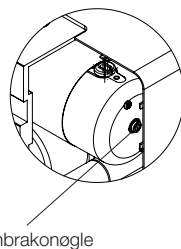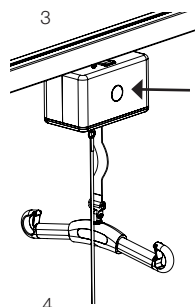

Unbrakonøgle

Fejlsøgning

Hvis løftebevægelsen ikke fungerer, kontroller følgende:

- At nødstoppet ikke er aktiveret. På visse modeller lyser nødstopssymbolet.
- At løfteren er tændt (ON) på håndbetjeningen (der skal høres en lyd).
- At håndbetjeningen er korrekt tilsluttet og ordentligt trykket ind. Træk kontakten ud, og tryk den ordentligt tilbage.
- At løfteren ikke står i opladningsposition. Løfteren er spærret for brug i opladningsposition.
- At batteriet er opladet.
- At løfterens oplader har strøm på. Opladningslampen på opladningsenheden skal lyse.
- At løfestroppen er belastet.

Hvis løfteren ikke fungerer tilfredsstillende, kontakt din forhandler.

Hvis løfteren ikke går helt op til stop, kontroller følgende:

- At symbolet for overbelastning ikke lyser.
- At batterisymbolet ikke advarer om lav batterispænding.

Hvis løfteren ikke kører nedad, kontroller følgende:

- At løfestroppen er belastet.
- At batterisymbolet ikke advarer om lav batterispænding.
- At trykknappernes retningsvisere, pil op og pil ned, er korrekte.

Hvis der høres en mislyd:

- Forsøg at fastslå, hvor lyden kommer fra. Tag løfteren ud af brug, og kontakt din forhandler.

Symbolangivelse:



Symbolet angiver, at løfteren skal efterses; kontakt din forhandler.
Symbolet tændes efter 6-12 måneder.



Angiver batteristatus.

Tilbehør

SystemRoMedic

Løftesejl

I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekvemme løftesejl af høj kvalitet tilpassede alle typer løft og til brugere med forskellige behov. Løftesejlene findes i flere for-skellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette at anvende. Valg af model og materiale bestemmes af løftesituationen og brugerens behov.



Ophængsbøjler

SlingBar er SystemRoMedics ophængsbøjle i aluminium. Den findes i tre forskellige bredder og passer derfor til de fleste løftesituationer og til brugere i alle størrelser.

SlingBar S, (350 mm) varenummer: 70200001


SlingBar M, (450 mm) varenummer: 70200002

SlingBar L, (600 mm) varenummer: 70200003

SlingBarSpreader M, varenummer: 70200042

SwiftHook snapkobling til ophængsbøjle, varenummer: 70200008

StretchBar, varenummer: 70200006, og StretchSling, varenummer: 46502007, til løft i liggende stilling.

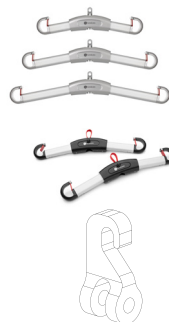


Vægte

SystemRoMedics vægte Charder MHS2500 anvendes sammen med stationær eller mobil løfter til at veje patienter.

Varenummer: 70100002 (300 kg)

Varenummer: 70100003 (400 kg)

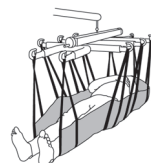

Positioneringshjælpemidler

I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekvemme positionerings-hjælpemidler af høj kvalitet tilpassede forskellige typer forflytninger og til brugere med forskellige behov.



Øvrigt

Cover to charger, varenummer: 50400066

9V battery and cable, varenummer: 70200047

Software for diagnostics, varenummer: 70200048

Parking Placard, varenummer: 50400048



Ophængsbøjle

Ready for life firepunkts-ophængsbøjle, Sling bar RFL X4, er udviklet til at give mere plads i løftesejlet til f.eks. overvægtige og/eller smertesensitive personer.

Varenummer: 70200017



Vedligehold

Løfteren skal gennemgå en omhyggelig kontrol mindst en gang om året. Kontrollen udføres af autoriseret personale i overensstemmelse med Handicares servicemanual.

Reparation og vedligehold må kun udføres af autoriseret personale, som anvender originale reservedele.



Udtjente batterier afleveres til nærmeste genbrugsstation til genvinding. De kan alternativt sendes til Handicare eller til en forhandler af Handicares produkter.

Rengøring

Rengør løfteren med varmt vand eller rengøringssprit. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder fenol eller klor, da det kan skade materialet.

Opbevaring

Oplad batterierne regelmæssigt for maksimal levetid; vi anbefaler at placere løfteren i opladningsstationen, når den ikke er i brug. Lad ikke batteriets opladningsniveau falde til under 25 %. Løfteren bør opbevares frostfrit mellem 10°C og 40°C samt ikke over normal luftfugtighed, 30 % - 75 %. Luftrykket skal ligge mellem 700 og 1060 hPa.

Serviceaftale

Handicare tilbyder mulighed for at regne en serviceaftale for vedligehold og tilbagevendende afprøvning jeres mobile løfter. Kontakt din lokale Handicare-repræsentant.

Teknisk information

Løftløfter:	24VDC
Løftehastighed:	3,9 cm/s (5,0 cm/s), 1.5 inch/s (2.0 inch/s) med (uden) belastning
Oplader IN:	Mascot 2215 100-240VAC/ 50-60Hz Max. 0,9A.
Oplader UT:	41 VDC/ $\pm 0,3$ Max. 0,9A
Batterier:	24 VDC (20st 1,2VDC) 3,2 Ah. NIMH20XA3200
Motorcover:	Ikke brandbart ABS-plastik
Håndbetjening:	Elektrisk
Nødfir:	Manuelt og elektrisk
Løfterens vægt:	7,5 kg, 16,5 lbs
Løfteområde:	240 cm, 95 inch
Max. belastning RiseAtlas450T:	205 kg, 450 lbs
Max. belastning RiseAtlas625T:	285 kg, 625 lbs
Lydniveau:	Uden belastning: 55 dB(A), Med belastning: 57 dB(A).
Trykkraft håndbetjening:	Trykkraft på håndbetjening: 4 N
Mål løftløfter:	26,6 x 15,1 x 15,6 cm, 10,5 x 5,9 x 6,1 inch
Intermitterende drift:	Op 10/90, aktiv drift max. 2 min. drift: Af en tid på 100 må aktiv tid højst være 10.
Tæthedsgrad, løftemodul:	IP 20
Tæthedsgrad, håndbetjening:	IP X4
Forventet levetid:	10 år



Apparatet er beregnet til indendørs brug.



Type B, iht. beskyttelsesgrad mod elektrisk stød.




Klass II udstyr.



Produktet er i overensstemmelse med kravene i direktiverne for medicinsk-tekniske klasse 1 produkter (MDD93/42/EEG).

Detaljebeskrivelse

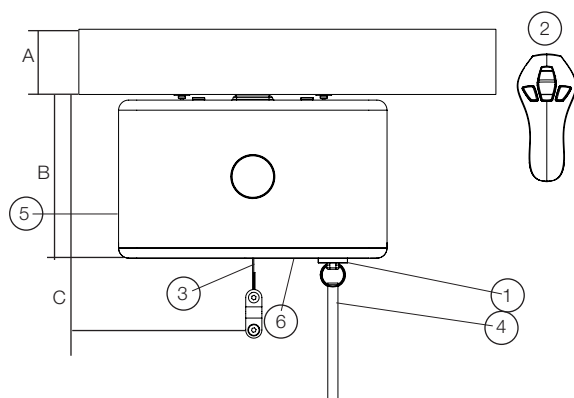

1. Udtag til håndbetjening
2. Håndbetjening
3. Løftestrop
4. Nødstop og elektrisk nødfir
- 5 Manuelt nødfir/hævning
6. Oplysningspanel

A. Skinne 6,4-16,0 cm

B. Løftemotorens byggehøjde 16,0 cm

C. Indbygningsmål 23,0 cm

Indbygningsmål på SlingBar M, 32,7 cm

I 25 år har vi helhjertet beskæftiget os med udviklingen af smarte og letanvendelige hjælpemidler til sikre og enkle forflytninger, samt til at gøre livet og arbejdet lettere for brugere og personale inden for pleje og omsorg.

Erfaring, innovation og uddannelse ligger til grund for SystemRoMedic, en helhedsløsning til alle tænkelige forflytningssituationer.

Forflytning, produkter til forflytning mellem to enheder

Positionering, produkter til lejeændring inden for samme enhed

Støtte, produkter til støtte ved mobilisering

Løft, produkter tilpasset løft

Filosofien bag SystemRoMedic fokuserer på at mindske der opstår arbejdsrelaterede skader, samtidig med, at brugerens oplevelse af selvstændighed, uafhængighed og værdighed øges. Gennem en kombination af uddannelse, træning og et komplet sortiment af effektive forflytningshjælpemidler tilbyder SystemRoMedic forbedring af både arbejdsmiljø og kvaliteten af pleje, samtidig med at der kan foretages signifikante omkostningsbesparelser.

Vores mission, at hjælpe mennesker, har altid været, og vil altid være, drivkraften bag vores innovationer. Vi elsker enkle forflytninger.

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside www.handicare.com



handicare

Handicare AB
Veddestav. 15, Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se

Internet: www.handicare.com