

Max: 300kg

BackBoardStraps wurde entwickelt, um zusammen mit Ferno Scoop Stretcher 065 EXL mechanisches Anheben mit einer manuellen Bahre im Notaufnahmebereich zu ermöglichen. Die Bänder sind entsprechend dieser Anleitung am Ferno Scoop Stretcher anzubringen. BackBoardStraps bestehen aus vier separaten Hebebändern mit 6 alternativen Aufhängeösen an einer Seite jedes Bandes, um die Bahre während des Anhebens im Gleichgewicht zu halten. BackBoardStraps werden an den Handgriffelöchern befestigt (zwei an jeder Seite) und dann an den Haken des Hehebügels angebracht.

Das SystemRoMedic umfasst eine breite Auswahl an funktionellen und bequemen Hebegurten hoher Qualität, speziell entwickelt für verschiedene Arten von Hebeaktionen und für Patienten mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Hebegurte sind in mehreren Materialausführungen und Größen von XXS bis XXL erhältlich. Sämtliche Modelle sind sowohl sicher als auch einfach in der Anwendung und halten einer Belastung bis zu 300 kg stand. Die Wahl von Modell und Material ist abhängig von der jeweiligen Hebesituation und dem Bedarf des Patienten.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung und mechanische Kontrolle

Unterziehen Sie den Hebegurt regelmäßigen Funktionskontrollen. Nach jeder Wäsche prüfen. Prüfen Sie Nähte und Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist. Belasten Sie Schnallen und Griffe und prüfen Sie, ob sie starker Belastung standhalten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung


Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Verweilen Sie während des Umsetzungsmoments beim Patienten.

Vermeiden Sie die Gefahr des Abgleitens oder Unbehagens durch sorgfältige Prüfung des Hebegurtes. Zunächst die Rückenschlaufen des Hebegurtes einhängen, danach die Schlaufen der Beinstütze. Nur geprüfte Hehebügel verwenden. Das zusammengebaute Produkt darf jedoch auf keinen Fall höher belastet werden als das Einzelteil mit der geringsten Höchstbelastung. Prüfen Sie in jedem Fall vor der Anwendung die zulässige Höchstbelastung von Lifter und Zubehör. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Befestigung und Anwendung

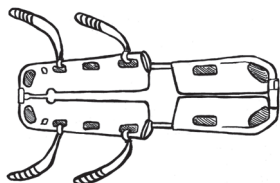

Die Bänder in den Löchern an den Seiten der Bahre in Höhe der Hüften und Schultern des Patienten anbringen.

Hierzu die Bandschleife durch das Loch ziehen und das andere Ende durch die Schlaufe führen.

An jeder Seite der Bahre je zwei Bänder anbringen und am Hehebügel befestigen. Die Breite des Hehebügels auf den Patienten einstellen, um Unbehagen zu vermeiden.

Wählen Sie eine der sechs alternativen Hebeösen, um die Bahre vor dem Anheben ins Gleichgewicht zu bringen.

Etwas anheben und prüfen, ob die Bahre in Horizontallage im Gleichgewicht ist. Wenn dies der Fall ist, den Hebevorgang fortsetzen, andernfalls wieder absetzen und Ösen neu einstellen. Diesen Vorgang für jede Hebesituation wiederholen, um sicher zu gehen, dass ein balanciertes Anheben gewährleistet ist.



Auf horizontale Lage achten!

Stets Sicherheitsgurte gemäß Anleitung für Ferno Scoop Stretcher verwenden!

Vor dem Anheben:

Handbuch für Ferno Scoop Stretcher lesen und Anleitungen befolgen.

Hebevorgang planen und entscheiden, wie viele Hilfspersonen erforderlich sind, um hohe Sicherheit zu garantieren.


Nie höher als notwendig anheben.

Verweilen Sie während des Hebemoments beim Patienten.

Maße

A: 110 cm

B: 8 cm

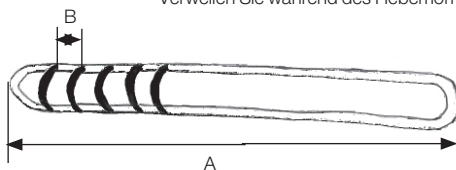

Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett des Hebegurtes.



Kein Weichspülmittel verwenden.
Für längere Lebensdauer
Trocknen im Wäschetrockner
vermeiden.

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf www.handicare.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage www.handicare.com zum Download bereit.

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

