




Max: 300kg

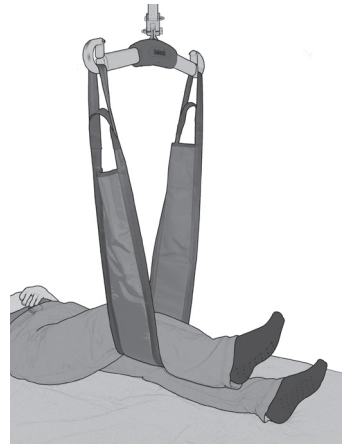

De LimbSling is ontwikkeld als hulp bij het comfortabel en gemakkelijk tillen van een been of arm van patiënten, bijvoorbeeld bij het aanbrengen van verband op wonden. De tilband wordt aangebracht door hem onder de ledemaat aan te brengen en de bandlussen aan het tiljuk te bevestigen.

SystemRoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.



Functionele inspectie

Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen.

Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.



Lees altijd de instructies


Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.

Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden.

Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht.

Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.

Aanbrengen van de LimbSling onder een been:

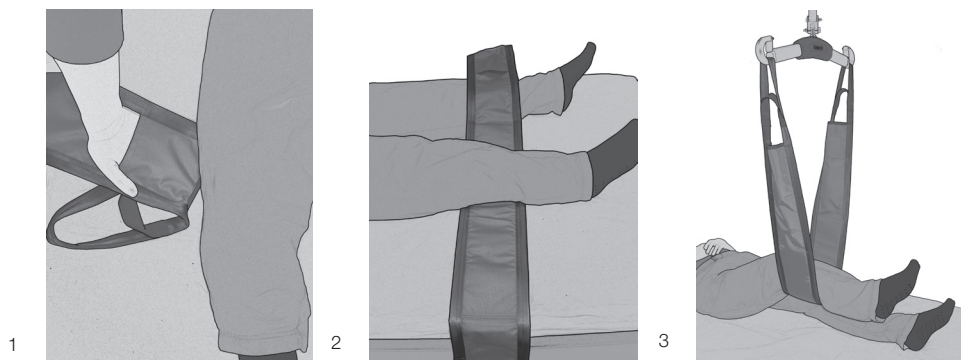

1. Breng de LimbSling aan door uw hand in het zakje op de rand van de tilband te steken en hem onder de te tillen ledemaat door te schuiven.
2. Trek hem uit aan de andere kant en bevestig de bandlussen aan het tiljuk.
3. Laat de lift omhoog gaan en stop dan om te controleren of alles naar behoren is voordat er naar de gewenste positie wordt getild.

Materiaal:

Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving.

Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasmiddel.
Hang de band, voor een maximale levensduur, op om te drogen of droog hem bij lage temperatuur in de droger.

Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Handicarevertegenwoordiger.

Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar www.handicare.com. Zorg dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van onze website: www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

