

**Maximale belasting: 300 kg/660 lbs**

StandUpSling is een gemakkelijk aan te brengen opstabilband die de patiënt een gevoel van veiligheid geeft. De band geeft steun in de rug tijdens het opstaan met een opstalif. StandUpSling geeft steun tijdens het opstaan en maakt toiletbezoek gemakkelijker.

SystemRoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.



## Functionele inspectie

Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen.

Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.



## Lees altijd de instructies


Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.

Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden.


Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht.

Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.

## Beschrijving van de bandlussen:

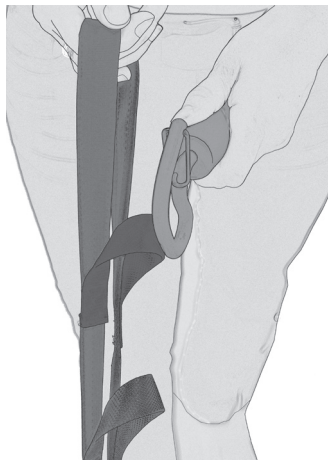


StandUpSling is geschikt voor drie applicatieopties.

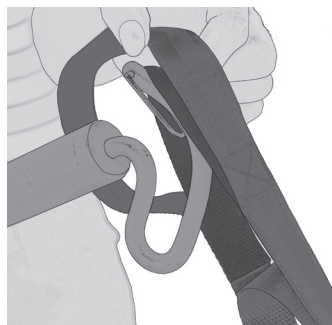


Kies de kortste bandlus die het tiljuk van de lift kan bereiken.

## Beschrijving voor de tailleband:

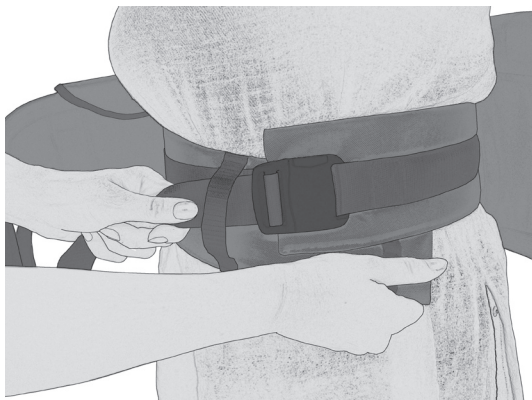

De doel van de middelgordel is om tijdens het tillen steun en een gevoel van veiligheid te geven. Als hij is bevestigd en er extra steun nodig is kan hij worden aangetrokken door aan de flap te trekken.

## Aanbrengen van de StandUpSling:

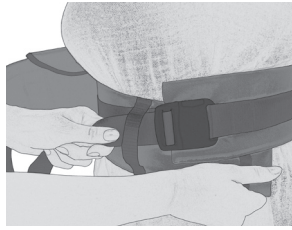


2


1

1. Plaats de StandUpSling achter de rug van de patiënt, met het label naar buiten. De onderrand van de band wordt boven de heupen van de patiënt aangebracht. De armen worden buiten de band gehouden. Dit gaat gemakkelijker als de patiënt voorover leunt of geholpen kan worden om iets voorover te leunen. Het middendeel van de tilband moet de rug van de patiënt volgen.

2. De taille gordel wordt bevestigd en aangepast aan de grootte van de patiënt.

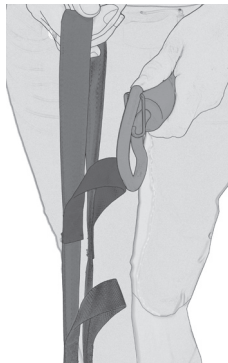

3

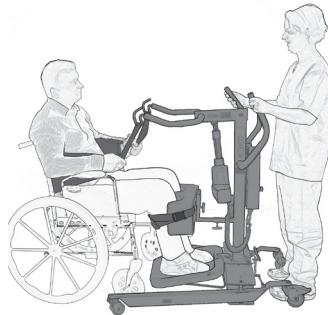


4

3. Plaats de individueel ingestelde opstalift voor de patiënt (zie lifthandleiding voor aanwijzingen voor de proefinstelling) en plaats de voeten van de patiënt op de voertrus.

4. Plaats de lift voorzichtig zo dicht mogelijk bij de patiënt zodat u kunt bepalen welke bandlus het meest geschikt is. Verleng de lus zo ver mogelijk voordat u hem aan het tiljuk bevestigt.

## Verwijderen van de StandUpSling:

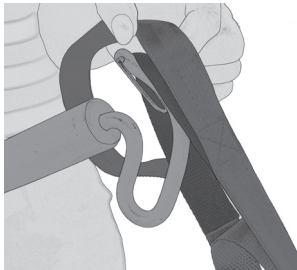

1



2

1. Haak de bandlussen los van het tiljuk en maak de kuitband los.

2. Verwijder de lift, maak de taille gordel los en trek de band achter de rug van de patiënt langs omhoog.

## Accessoires:

Er kan een extra laag zacht materiaal aan de band worden bevestigd als de patiënt een zachter oppervlak nodig heeft.



## Materiaal:

Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving.

## Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasmiddel.  
Hang de band, voor een maximale levensduur, op om te drogen of droog hem bij lage temperatuur in de droger.

## Maten

Maat	S/rood	M/geel	L/groen	XL/paars	XXL/wit	
Aanbev. Gewicht patiënt	kg	40-65	55-80	75-110	100-160	150-220

Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Handicarevertegenwoordiger.

Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Zorg dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van onze website: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8-557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

