

Maximale belasting: 300 kg/660 lbs



Het WalkingVest is gemakkelijk door de zorgverlener aan te brengen en geeft de patiënt een gevoel van veiligheid. Het is ontwikkeld om tijdens het opstaan en bij looptraining via een beenharnas steun te bieden rond het bovenlichaam en in de liesstreek. Het WalkingVest is ontwikkeld om de patiënt veilig en comfortabel te activeren.

SystemRoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.



## Functionele inspectie

Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen.

Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.



## Lees altijd de instructies


Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.

Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden.

Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht.

Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.

## Omschrijving van het WalkingVest:

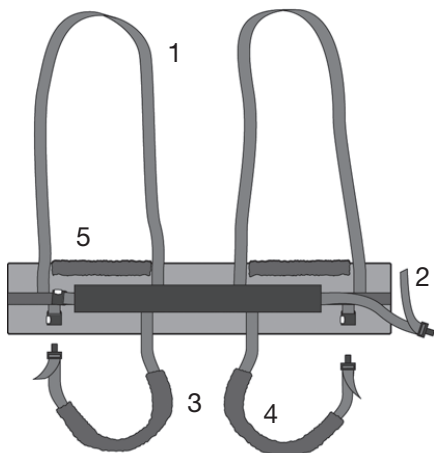


Het WalkingVest bestaat uit:

1. Tillussen (grijs)
2. Middelgordel (rood)
3. Beenharnas (zwart)
4. Polstering voor het beenharnas
5. Polstering voor vest

De tillussen worden bevestigd aan het tiljuk. De middelgordel en het beenharnas zijn voorzien van een snelgesp voor gemakkelijk aanbrengen. Het beenharnas wordt rond de dijen aangebracht, van achteren naar voren. Het beenharnas is gepolsterd; dit voorkomt druk en schuren in de liezen. Om druk en schuren te voorkomen is het tilvest ook op armhoogte gepolsterd.

## Aanbrengen van het WalkingVest in een zittende positie:

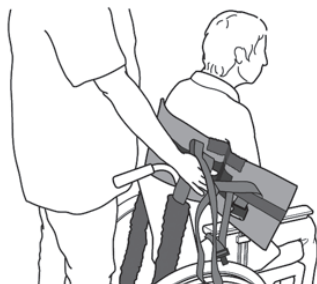


1. Breng het WalkingVest aan rond het bovenlichaam, met de gesp naar voren. De onderrand van de band wordt boven de heupen van de patiënt aangebracht. De armen worden buiten de band gehouden. Het middendeel van het vest moet de rug van de patiënt volgen.



2. De middelgordel wordt vastgemaakt en aangepast aan de grootte van de patiënt.

## Aanbrengen van het beenharnas in een zittende positie:

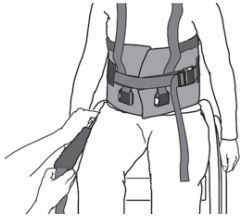

1. Als het vest rond het bovenlichaam van de patiënt wordt aangebracht wordt het beenharnas van opzij en onder de dijen geplaatst.



2. Het beenharnas wordt aan de voorzijde vastgemaakt.



3. Pas het beenharnas aan zodat het de patiënt goed past.

## Opstaan naar een staande positie:



1. Bereid de patiënt voor door de procedure uit te leggen. Laat een patiënt die is opgetild nooit zonder toezicht. Let altijd goed op de signalen die de patiënt geeft. Stop het tillen als de patiënt zich ongemakkelijk voelt.



2. Als de patiënt staat kan een loopondersteuning worden gebruikt.

## Materiaal:

Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving.

## Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasmiddel.  
Hang de band, voor een maximale levensduur, op om te drogen of droog hem bij lage temperatuur in de droger.

## Maten

Maat		XXS/grijs	XS/oranje	S/rood	M/geel	L/groen	XL/paars	XXL/wit
Maat tilband	cm	60	70	82	96	110	122	142
	inch	24	27,5	32	38	43	48	56
Aanbevolen gewicht patiënt	lbs	33-88	44-110	88-132	121-176	165-220	198-243	220-287
	kg	15-40	25-50	40-60	55-80	75-100	90-110	100-130

Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Handicarevertegenwoordiger.

Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Zorg dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van onze website: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

### Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

