

**Maks belastning: 300 kg**

AdjustmentLoops, forlengelsesbånd, benyttes til å forlenge løfteselens løftebånd til ønsket lengde, som f. eks. til sittende eller liggende stilling eller for likevekt ved halvsidelammelser.

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, komfortable og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike typer av løft og for brukere med ulike behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser - fra XXS till XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette i bruk, og de kan brukes på brukere opp til 300 kg. Valget av modell og materiale avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.



## Kontroll av funksjon

### Visuell og mekanisk inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



## Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.


Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens rygggløkker på løftebøylen, huk deretter på beinlukkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.


Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.

## Bruk av forlengelsesbånd

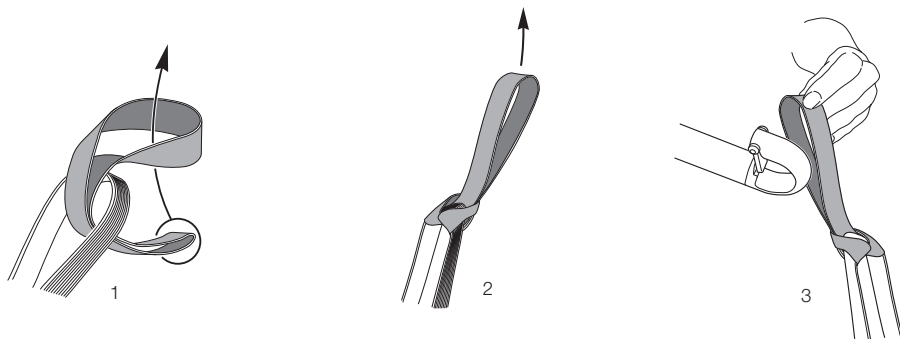

1. Lag en knute på løftebåndet med forlengelsesbåndet.
2. Fest den godt slik at den sitter hardt rundt løftebåndet.
3. Heng forlengelsesbåndet på løftebøylen. Start med å heve løftebøylen forsiktig. Stopp underveis for å kontrollere at alt er i orden før du hever til ønsket høyde.

## Alternativ plassering av forlengelsesbånd

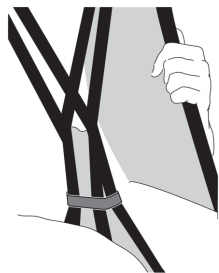

Forlengelsesbåndene kan også brukes på benstroppene for å minske åpningen og forhindre risiko for utglidning av løfteselen.

## Størrelser:



## Materiale:

Polyester: Slitesterkt materiale med lav friksjon.  
Klarer høy vasketemperatur.

## Vedlikeholdsråd:

Les på løfteselens merkeetikett.



Bruk ikke skyllemiddel.

Unngå tørketrommel for lengre levetid.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se [www.handicare.com](http://www.handicare.com) for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB  
Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN  
Tel: +46 (0)8 -557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

