


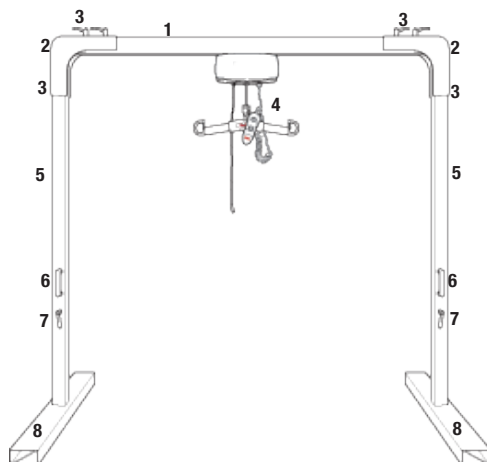

1. Schiene (nicht enthalten)
2. Eckstück
3. Schrauben und Muttern zur Befestigung
4. Hubmotor (nicht enthalten)
5. Stützbeine
6. Traggriff an Stützbeinen
7. Feststellgriff für Stützbeine
8. Stützfuß

Höchstbelastung: 300 kg

Castor ist ein frei stehendes Hubstativ, das zusammen mit Schiene und Hubmotor einen stationären Patientenlifter bildet. Es eignet sich besonders gut bei gelegentlichem Bedarf stationärer Hebefunktion oder in Fällen, in denen die Installation eines festen Schienensystems an der Decke nicht möglich ist. Castor ist aus Aluminium gefertigt und hat somit im Verhältnis zu seiner hohen Hubleistung äußerst geringes Gewicht.

Handicares Produktserie SystemRoMedic umfasst u. a. Lifter und Hebegurte. SystemRoMedic, ein Universalsystem zum Versetzen von Personen, lässt sich in vier Bereiche aufgliedern: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Unterziehen Sie Castor und den Hubmotor regelmäßigen Funktionsprüfungen. Vergewissern Sie sich, dass das Material unbeschädigt ist.

Vor der Benutzung:

Prüfen Sie das Hubstativ und den Hubmotor auf korrekte Montage. Kontrollieren Sie sämtliche Befestigungen und Sicherheitssperren.



Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung

Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten. Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.


Patientenlifter dürfen nur von Personen benutzt werden, die für die Handhabung des Gerätes ausgebildet sind.

Inhaltsverzeichnis

Montage	3-5
Komponenten	3
Montage der Stützbeine	3
Montage von Schiene und Hubmotor	4
Abschließende Inspektion	5
Verwenden des Produktes	5
Wichtige Hinweise	5
Höchstbelastung	5
Zubehör	6
Wartung	7
Technische Informationen	8
Maße	8

Montage

Komponenten:

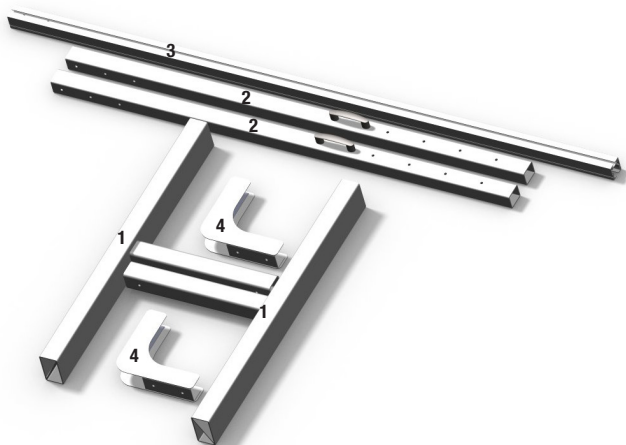

1. 2 Stützfüße

2. 2 Stützbeine mit Tragegriff

3. Schiene (nicht enthalten, separat zu bestellen)


4. 2 Eckstücke

8 Schrauben mit Muttern zur Montage von Stützbeinen und Schiene.

Montage der Stützbeine

1. Stützbein in den entsprechenden Fuß einführen und gewünschte Höhe für Castor einstellen.

2. Zur Sicherung des Stützbeins in gewünschter Höhe den Drehknopf festziehen.

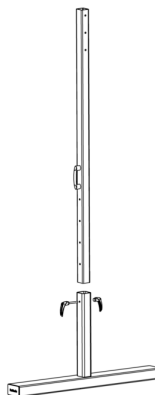

Montage von Schiene und Hubmotor

1, 2. Stützbein in Eckstück einsetzen und mit zwei Schrauben befestigen.

Mit den übrigen Stützbeinen und Eckstück analog verfahren.

3. Schrauben an beiden Seiten an der Schiene befestigen.

4. Schiene in eines der Eckstücke einsetzen und festschrauben.

ACHTUNG! Montieren Sie den Hubmotor/Wagen für Hubmotor, bevor Sie das andere Stützbein befestigen.

5. Montieren Sie den Hubmotor gemäß einer der nachstehenden Alternativen.

1. Hubmotor mit eingebautem Wagen:

Hubmotor in die Schiene einführen (siehe Abb.), bevor Sie die andere Seite der Schiene am Eckstück befestigen.


2. Mobiler Hubmotor mit separatem Wagen:

Montieren Sie einen Wagen an der Schiene, bevor die andere Seite der Schiene am Eckstück befestigt wird. Wenn das gesamte Stativ montiert ist, kann der mobile Hubmotor eingehakt werden.

Siehe Anleitung für den jeweiligen Lifter für erweiterte Nutzung des Hubmotors.

6. Damit der Hubmotor bei der Montage des anderen Stützbeins nicht an der Schiene entlang fährt, muss er an dem bereits montierten Bein befestigt werden. Es empfiehlt sich zur Sicherung des Motors einen Endanschlag zu benutzen. Dieser kann nach Abschluss der Montage zum anderen Ende verschoben werden und dort verbleiben.

7. Schrauben sie die andere Seite der Schiene am anderen Eckstück fest, siehe Abb. 4,7.

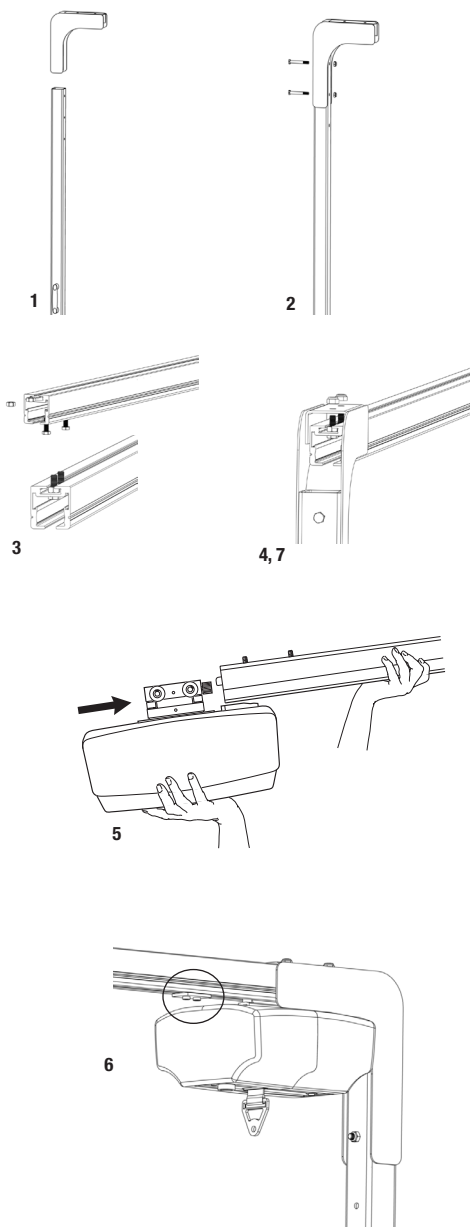

Abschließende Inspektion

Inspezieren Sie Castor, um eventuelle Anzeichen von Schäden zu entdecken. Prüfen Sie, dass Castor stabil steht, nicht wackelt und die Stützbeine auf gleiche Höhe eingestellt sind.

Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

Der Hubmotor wird entsprechend der periodischen Inspektion des Patientenlifters geprüft.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Verwenden des Produktes



Wichtige Hinweise

- Castor ist entsprechend der beiliegenden Montageanleitung zu montieren.
- Castor darf nur auf ebenem Fußboden verwendet werden.
- Zubehörteile müssen entsprechend den Bedürfnissen und Funktionen des Patienten erprobt werden.
- Verweilen Sie während des Umsetzmoments beim Patienten.
- Die Höchstbelastung darf unter keinen Umständen überschritten werden. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt Höchstbelastung.
- Für optimale Funktion ist Castor regelmäßig zu überprüfen. Siehe Kapitel Wartung.
- Die Garantie gilt nur dann, wenn Reparaturen oder Änderungen von hierzu befugtem Personal ausgeführt werden.

Höchstbelastung

Die einzelnen Produkte innerhalb der zusammengebauten Hebeeinheit (Lifter, Hehebügel, Hebegurt, Waage und evtl. anderes Zubehör) haben unterschiedliche zulässige Höchstbelastungen. Das zusammengebaute Produkt darf jedoch auf keinen Fall höher belastet werden als das Einzelteil mit der geringsten Höchstbelastung. Prüfen Sie in jedem Fall vor der Anwendung die zulässige Höchstbelastung von Lifter und Zubehör. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Zubehör


Feststellgriff

Zur Vereinfachung der Montage der Schiene können die Schrauben durch 4 Feststellgriffe ersetzt werden.



Hubmotoren

Die Hubmotoren von SystemRoMedic sind in verschiedenen Varianten und Ausführungen - stationär oder mobil - erhältlich. Die Wahl des Modells hängt vom Bedarf der Hubleistung, der Umgebung und den Situationen für dessen Einsatz sowie den Bedürfnissen der Patienten ab.

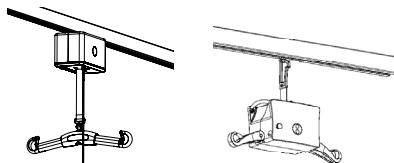

Hebegurte

Die Hebegurte des SystemRoMedic gibt es in mehreren Materialien und sind Teil einer Serie verschiedener Modelle von Hebegurten. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Fähigkeiten des Patienten und die jeweiligen Einsatzsituationen. Für Hebegurte und andere Zubehörteile siehe SystemRoMedics Anleitungen für Hebegurte und Hebebügel.



Positionierungshilfen

TopSheet

SafeHandlingSheet

RoMedicClips



TopSheet



SafeHandlingSheet



RoMedicClips

Artikelnummer für komplettes Hubstativ

Castor, Hubstativ: **50300004**

Rail-64, Aluminium, weiß: **50400262-50400266**

Rail-120, Aluminium, weiß: **50400277- 50400290**

Rail-160, Aluminium, weiß: **50400295- 50400299**

Wartung

Castor ist mindestens einmal im Jahr einer umfangreichen Prüfung zu unterziehen. Die Prüfung ist von hierzu befugtem Personal gemäß den Anweisungen des SystemRoMedic für periodische Inspektion für Castor auszuführen.


Reparaturen und Wartung dürfen nur von Fachleuten unter Anwendung von Originalersatzteilen vorgenommen werden.

Reinigung

Bei Bedarf den Hebestativ mit warmem Wasser oder Spiritus reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden, die Phenol oder Chlor enthalten, da diese Substanzen das Material beschädigen können.

Technische Informationen

Maße

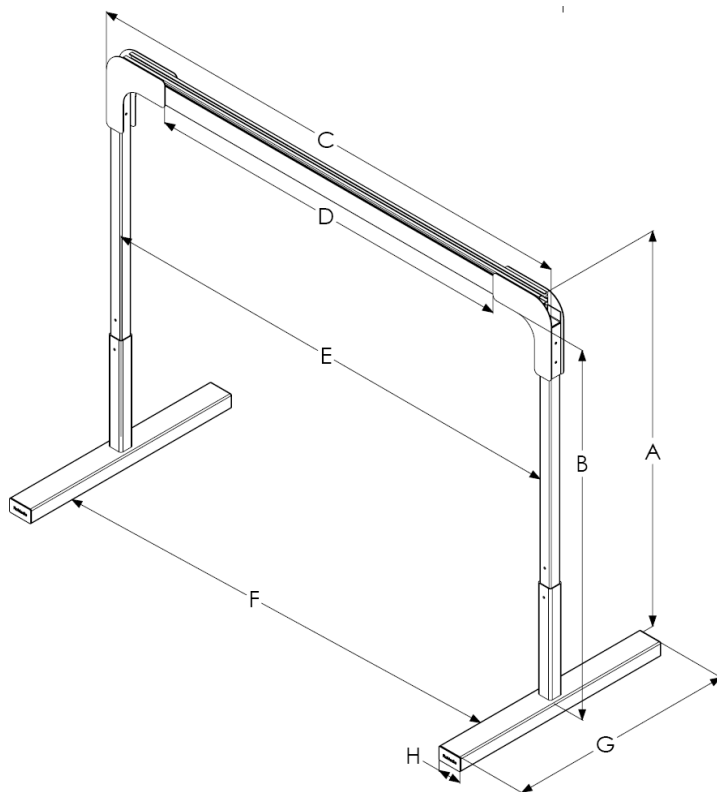

	A	B
A	200-244	78,8-96,14
B	192-227	75,65-89,44
C	200-500	78,8-197
D	223-523	87,86-206,06
E	209-509	82,35-200,55
F	204-504	80,38-198,58
G	120	47,3
H	13	5,1
I	49,6-86,4	109.3-190.4
J	31	68.6

In Spalte A sind die Maße in Zentimeter und das Gewicht in Kilogramm angegeben.

In Spalte B sind die Maße in Zoll und das Gewicht in lbs angegeben.

I ist das Gesamtgewicht des Hubstativs

J ist das Gewicht des schwersten Teils

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations and bathing and toileting products.



Handicare AB
Torshamnsgatan 35
SE-164 40 Kista, SWEDEN
Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se
www.handicare.com